

Instrukcja obsługi



VisioClick®



Spis treści

1. Wprowadzenie	4
1.1. Lista dostarczonego wyposażenia	5
1.2. Prezentacja	5
1.3. Dane techniczne	6
1.4. Symbole	7
2. Bezpieczeństwo	8
2.1. Informacje ogólne	9
2.2. Użytkownicy	11
2.3. Przeciwwskazania medyczne	11
2.4. Środki ostrożności przed rozpoczęciem badania	11
3. Instalacja	12
3.1. Procedura instalacji sprzętu	13
3.1.1. Odpakowywanie	13
3.1.2. Nazewnictwo	13
3.1.3. Tryb działania	14
3.1.4. Montaż i podłączenie	14
3.2. Kompatybilne systemy operacyjne	15
3.3. Korzystanie z oprogramowania urządzenia FIM	15
4. Dostępne akcesoria	16
4.1. Higieniczne nakładki jednorazowego użytku (nr kat. SS1105)	17
4.2. Zestaw słuchawkowy (nr kat. SS1104)	17
4.3. Kabel USB (nr kat. SS1103)	17
5. Użytkowanie	18
5.1. Zakładanie jednorazowych nakładek higienicznych	19
5.2. Użycie z urządzeniem Visiolite®	19
6. Obsługa - Konserwacja	20
6.1. Czyszczenie obudowy	21
6.2. Czyszczenie zestawu słuchawkowego	21
6.3. Lista ogólnodostępnych środków bakteriobójczych i grzybobójczych zatwierdzonych przez firmę FIM MEDICAL	21
6.4. W razie problemów	22
6.5. Gwarancja	22

6.6.	Recykling i wycofanie z użytku	22
7.	FAQ	23
7.1.	Nie słyszysz żadnego dźwięku	24
7.2.	Czy mogę użyć innego zestawu słuchawkowego niż ten dostarczony przez firmę FIM MEDICAL?	24
7.3.	Czy mogę podłączyć urządzenie inne niż Visiolite do portu USB urządzenia VisioClick®?	24

1. Wprowadzenie

1.1. Lista dostarczonego wyposażenia

Po rozpakowaniu dysponujesz następującym sprzętem:

- Urządzenie VisioClick®
- 1 kabel USB (długość kabla 1 m)
- 1 zestaw słuchawkowy (złącze jack 3,5 mm, długość kabla 1,2 m)
- 1 metalowy stojak na słuchawki
- CD Rom zawierający podręcznik użytkownika VisioClick® i oprogramowanie VISIOLITE®
- Karta informacyjna
- Pokrowiec transportowy

Uwaga: Urządzenie VisioClick® musi zostać zwrócone do serwisu posprzedażnego (celem naprawy) w oryginalnym opakowaniu. Naprawa gwarancyjna nie będzie możliwa w przypadku braku oryginalnego opakowania.

1.2. Prezentacja

Zaleca się, aby przed użyciem urządzenia uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla użytkowników testera widzenia Visiolite® z automatycznym rozwiązaniem VisioClick®. Automatyczne rozwiązanie VisioClick® jest kompatybilne z komputerowymi testerami widzenia Visiolite® V4 (od 2012 roku) i wersją v5 oprogramowania Visiolite®.

VisioClick® to urządzenie służące do automatyzacji testera widzenia VISIOLITE®. Działanie tego urządzenia polega na przekazywaniu instrukcji głosowych pacjentowi za pośrednictwem słuchawek w celu uwzględnienia jego reakcji sygnalizowanych za pomocą przycisku oraz w celu przekazywania informacji między komputerem a urządzeniem przesiewowym FIM MEDICAL.

VisioClick® składa się z obudowy z przyciskiem odpowiedzi (osłona) i z zestawu słuchawkowego. Urządzenie jest podłączone do komputera za pomocą pierwszego złącza USB oraz do testera widzenia Visiolite® za pośrednictwem drugiego złącza USB. Operator kontroluje urządzenie za pomocą oprogramowania Visiolite®.

VISIOCLICK® to nowe urządzenie, którego celem jest odciążenie pracowników służby zdrowia poprzez zwiększenie autonomii pacjenta w trakcie badania. Pracownik służby zdrowia może skoncentrować się na innych zadaniach podczas przeprowadzania jednego lub kilku jednoczesnych badań z udziałem pacjentów. Ponadto, VisioClick® umożliwia generowanie dźwięków w języku pacjenta odbywającego testy.

Obecność pracownika służby zdrowia w bezpośrednim sąsiedztwie jest obowiązkowa podczas całego trwania testu.

1.3.Dane techniczne

Dane techniczne urządzenia VisioClick®:	
Temperatura przechowywania	od -10 do 60°C
Temperatura użytkowania	od 15 do 35°C
Dopuszczalna wilgotność powietrza	maks. 75%
Wysokość bezwzględna pracy urządzenia	2 000 metrów
Napięcie	5 VDC (zasilanie przez port USB)
Moc	maks. 2,5 W
Impedancja wyjściowa	od 16 do 32 Ω
Złącze audio	3,5 mm
Normy odniesienia	IEC 60601-1, IEC 60601-1-2
Klasa medyczna	I (reguła 12)
Klasa bezpieczeństwa oprogramowania	A
Klasa elektryczna	Klasa I
Część mająca zastosowanie	Typ BF
Kod wg GMDN	
Wymiary	250 x 140 x 50 mm (bez stojaka na słuchawki)
Masa urządzenia	476 g (sama obudowa) 706 g (z kablem, stojakiem i zestawem słuchawkowym)

Rok pierwszego uzyskania oznakowania CE: 2019

Charakterystyka dostarczonego zestawu słuchawkowego: (nr kat. SS1104)	
Długość kabla	1,2 m
Średnica nauszników	70 mm
Impedancja	32 Ω
Zakres częstotliwości	20 Hz - 20 KHz
Złącze	Jack audio 3,5 mm stereo 3-pin (TRS)

1.4.Symbole

Na etykietach znajdują się następujące oznaczenia:



Oznaczenie CE zgodnie z dyrektywą 93/42/CEE



Część mająca zastosowanie dla typu BF



Uwaga: Jeśli chcą Państwo usunąć to urządzenie, prosimy nie używać zwykłych pojemników na śmieci! Aby pozbyć się produktu wycofywanego z eksploatacji, należy skontaktować się z producentem.



Zapoznaj się z dokumentami towarzyszącymi

SN

Numer seryjny



Wytwórca



Nie używaj ponownie. Wyrób jednorazowego użytku

2. Bezpieczeństwo

2.1. Informacje ogólne

Uwaga:

- Używaj wyłącznie kabli i zasilaczy dostarczonych przez firmę FIM MEDICAL
- Nie demontuj urządzenia i nie dokonuj w nim przeróbek. Tylko serwis FIM MEDICAL oraz autoryzowani dystrybutorzy posiadają kwalifikacje do wykonywania zmian w sprzęcie
- Nie włączaj i nie używaj urządzenia Visiolite® w pobliżu materiałów wybuchowych i w obecności gazów anestetycznych
- Nie ciągnij za kable
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonymi kablami
- Żadna modyfikacja sprzętu nie jest dozwolona
- W razie przypadkowego uszkodzenia (na skutek upadku lub wstrząsu) zwróć urządzenie do serwisu FIM MEDICAL lub dystrybutora, o ile został on upoważniony przez firmę FIM MEDICAL do wykonywania czynności konserwacyjnych
- Nie narażaj urządzenia na działanie wilgoci. Chroń je przed zamoczeniem wszelkimi płynami. Urządzenia VisioClick® nie wolno czyścić pod bieżącą wodą ani bezpośrednio spryskiwać go cieczą
- Urządzenie należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni
- W przypadku widocznych uszkodzeń urządzenia lub jego akcesoriów, skontaktuj się z serwisem lub dystrybutorem firmy FIM MEDICAL
- Urządzenie VisioClick® jest przeznaczone do użytku z testerem widzenia Visiolite® lub innym autoryzowanym urządzeniem marki FIM MEDICAL. Wszelkie podłączanie do urządzeń innych marek jest niedozwolone.
- Konieczna jest wzrokowa weryfikacja poprawnego działania sprzętu przed użyciem i po każdym badaniu z udziałem pacjenta
- Stojak na zestaw słuchawkowy nie powinien być rozmontowywany podczas badania. Nie pozwalaj małym dzieciom bawić się urządzeniem
- Aby uniknąć problemów związanych z zakłóceniami elektromagnetycznymi lub związanymi z działaniem innych urządzeń, nie należy używać VisioClick® w zakłóconym środowisku lub zbyt blisko innych urządzeń
- Ze względów bezpieczeństwa należy zapewnić łatwy dostęp do połączenia kablowego USB w komputerze lub urządzeniu
- Unikaj używania VisioClick® w hałaśliwym otoczeniu, które utrudnia właściwe zrozumienie instrukcji głosowych podawanych za pośrednictwem zestawu słuchawkowego
- Choć urządzenie VisioClick® zapewnia pacjentowi pewien stopień autonomii, pracownik służby zdrowia musi zawsze być obecny w bezpośrednim sąsiedztwie, aby monitorować prawidłowy przebieg testów.
- Tester Visiolite® to wyrób medyczny w świetle przepisów, które mają do niego zastosowanie. Podłączanie urządzenia Visiolite® do komputera jest możliwe tylko wówczas, gdy komputer spełnia normę IEC60950 dotyczącą bezpieczeństwa urządzeń przetwarzających dane

Uwaga: aby spełnić wymagania normy ISO 10993 dotyczące biokompatybilności materiałów, należy obowiązkowo używać zestawu słuchawkowego z jednorazowymi higienicznymi nakładkami marki FIM MEDICAL.

2.2. Użytkownicy

Urządzenie VisioClick® jest przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia (pielęgniarek, lekarzy, okulistów, optyków itp.) używających testera widzenia Visiolite® i jego oprogramowania.

Z uwagi na poziom wykształcenia pracowników służby zdrowia urządzenie nie stwarza żadnych problemów w użytkowaniu.

Operator musi być odpowiednio przeszkolony w zakresie korzystania z komputerów i związanego z nimi systemu operacyjnego.

Operator musi być świadomy zasad higieny i zagrożeń związanych z zanieczyszczeniami bakteriologicznymi.

W razie wątpliwości pracownik służby zdrowia powinien zapoznać się z instrukcją użytkownika i/lub skontaktować się z firmą FIM MEDICAL lub jej dystrybutorem.

2.3. Przeciwwskazania medyczne

Ponieważ urządzenie VisioClick® współpracuje z testerem widzenia VISIOLITE® przeciwwskazania medyczne, które mają do niego zastosowanie, są przeciwwskazaniami związanymi z testerem widzenia VISIOLITE®. Patrz § 2.3 instrukcji użytkownika VISIOLITE®.

VisioClick® to aparat słuchowy z zestawem słuchawkowym do wydawania poleceń głosowych. Upewnij się, że pacjent jest w stanie zrozumieć instrukcje w wybranym języku i że może nosić zestaw słuchawkowy.

Noszenie aparatów słuchowych jest niedozwolone podczas testu.

2.4. Środki ostrożności przed rozpoczęciem badania

Przed użyciem urządzenia VisioClick® operator musi udzielić pacjentowi instrukcji i wyjaśnić mu działanie zautomatyzowanego urządzenia (słuchanie poleceń, udzielanie odpowiedzi itp.). Zapoznaj się z instrukcją użytkownika VISIOLITE®

3. Instalacja

3.1.Procedura instalacji sprzętu

3.1.1.Odpakowywanie

Wyjmij z pudełka torebkę zawierającą elementy składowe urządzenia VisioClick®.

Stanowczo zaleca się zachować oryginalne opakowanie Visiolite® w całości, by ułatwić przyszłe zabiegi konserwacyjne.



Ryc. 1 Otwieranie oryginalnego opakowania VisioClick®

3.1.2.Nazewnictwo



Ryc. 2 Urządzenie VisioClick® i jego akcesoria

1 Obudowa

Obudowa VisioClick® składa się z: bazy, na której umieszczony jest stojak na zestaw słuchawkowy, z części funkcjonalnej z przyciskiem odpowiedzi i z gniazd złączy.

2 Stojak na zestaw słuchawkowy

Stojak na zestaw słuchawkowy można zmontować w celu zawieszenia zestawu, gdy nie jest on używany.


3 Zestaw słuchawkowy

Zestaw słuchawkowy jest podłączony do bazy VisioClick® i umożliwia przekazywanie instrukcji podczas wykonywania testów.

4 Kabel USB

Kabel USB zapewnia połączenie z innym urządzeniem lub z komputerem. Służy on za źródło zasilania dla urządzenia VisioClick®.

3.1.3. Tryb działania

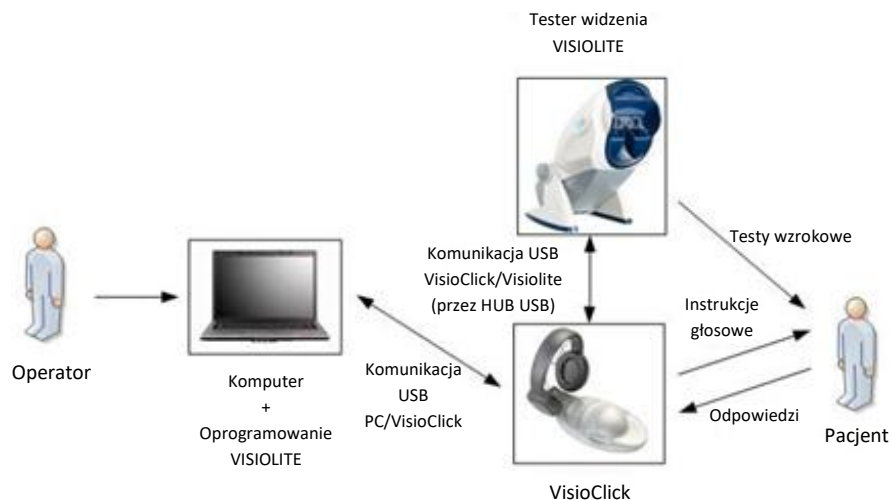

Ryc. 3 Schemat trybu działania VisioClick®

3.1.4. Montaż i podłączenie



Ryc. 4 Instalowanie stojaka na zestaw słuchawkowy

- Wsuń ramiona stojaka na zestaw słuchawkowy w 2 przewidziane do tego celu otwory w bazie. Pierścień lub pałąk, na którym spoczywa zestaw słuchawkowy muszą być zwrócone przodem do użytkownika. Sprawdź, czy ramiona są wsunięte do końca i czy stojak dobrze trzyma się na swoim miejscu.



Ryc. 5 Część tylna - gniazda złączy

1 Kabel audio zestawu słuchawkowego

2 Kabel USB łączący z urządzeniem FIM

3 Kabel USB łączący z komputerem

- Podłącz kabel słuchawek do gniazda jack (1) w bazie VisioClick®. Następnie umieść słuchawki na stojaku.



Ryc. 6 VisioClick® z zestawem słuchawkowym prawidłowo umieszczonym na stojaku

- Użyj kabla USB o dł. 1 m dostarczonego z VisioClick®, aby połączyć Visiolite® z VisioClick®. Płaski odcinek kabla jest podłączony do urządzenia VisioClick® (2), natomiast odcinek kwadratowy jest podłączony do urządzenia Visiolite®.
Uwaga: nadal konieczne jest podłączenie kabla zasilającego urządzenia Visiolite®. Patrz podręcznik użytkownika Visiolite®.
- Użyj kabla USB o dł. 3 m dostarczonego z urządzeniem Visiolite®, aby podłączyć VisioClick® do komputera. Kwadratowy odcinek kabla jest podłączony do VisioClick (3), a płaski odcinek jest podłączony do komputera.

3.2. Kompatybilne systemy operacyjne

Visiolite® współpracuje z następującymi systemami operacyjnymi: **Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 i Windows 10.**

3.3. Korzystanie z oprogramowania urządzenia FIM

VisioClick® jest przeznaczony do pracy z oprogramowaniem opracowanym dla urządzenia FIM, do którego jest podłączony. Informacje na temat korzystania z interfejsu oprogramowania można znaleźć w jego instrukcji obsługi.

Aby zapewnić prawidłowe działanie VisioClick®, konieczna jest aktualizacja oprogramowania urządzenia FIM (patrz instrukcja obsługi podłączonego urządzenia).

4. Dostępne akcesoria

4.1. Higieniczne nakładki jednorazowego użytku (nr kat. SS1105)

Firma FIM MEDICAL opracowała specjalne jednorazowe nakładki higieniczne do użytku ze słuchawkami dostarczonymi z urządzeniem VisioClick®.

Uwaga: Jednorazowe nakładki higieniczne powinny być używane podczas każdego badania i wymieniane przed każdym kolejnym pacjentem

Uwaga: Ze względu na higienę i biokompatybilność należy używać jednorazowych nakładek higienicznych marki FIM MEDICAL podczas korzystania z zestawu słuchawkowego.

Nakładki zostały dostosowane do rozmiarów słuchawek dostarczanych z urządzeniem VisioClick® i opracowane z myślą o spełnieniu wymagań normy ISO 10993 dotyczących biokompatybilności materiałów.

Jeśli potrzebujesz jednorazowych nakładek higienicznych firmy FIM MEDICAL, skontaktuj się z firmą FIM MEDICAL lub ze swoim dystrybutorem. Nakładki oferowane są w kilku wersjach.

4.2. Zestaw słuchawkowy (nr kat. SS1104)

Wraz z urządzeniem VisioClick® firma FIM MEDICAL wprowadza na rynek zestaw słuchawkowy, którego specyfikacja została określona w §1.3.

Można stosować inne dostępne na rynku zestawy słuchawkowe, o ile spełniają one wymogi techniczne określone w §1.3. (zakres impedancji, format złączy itp.) i pod warunkiem, że ich nauszники mają średnicę 70 mm, co pozwala stosować jednorazowe nakładki higieniczne opracowane przez firmę FIM MEDICAL (nr kat. SS1105).

Uwaga: Ze względu na higienę i biokompatybilność należy używać jednorazowych nakładek higienicznych marki FIM MEDICAL (nr kat. SS1105) podczas korzystania z zestawu słuchawkowego.

Nakładki zostały dostosowane do rozmiarów słuchawek dostarczanych z urządzeniem VisioClick® i opracowane z myślą o spełnieniu wymagań normy ISO 10993 dotyczących biokompatybilności materiałów.

Jeśli chcesz nabyć zestaw słuchawkowy, skontaktuj się z firmą FIM MEDICAL lub z jej dystrybutorem.

4.3. Kabel USB (nr kat. SS1103)

Firma FIM MEDICAL prowadzi sprzedaż kabli USB VisioClick® A-B o długości 1 m.

5. Użytkowanie

5.1. Zakładanie jednorazowych nakładek higienicznych



Ryc. 7 Sposób zakładania higienicznej nakładki na słuchawkę

- ✓ Załóż jednorazowe nakładki higieniczne na każdą ze słuchawek (od strony głośnika).
- ✓ Dopasuj nakładki, aby uniknąć fałd i zgrubień między słuchawką a pacjentem.

Przypomnienie: Jednorazowe nakładki higieniczne powinny być używane podczas każdego badania i wymieniane przed każdym kolejnym pacjentem.

Nakładki zostały dostosowane do rozmiarów słuchawek i opracowane z myślą o spełnieniu wymagań normy ISO 10993 dotyczących biokompatybilności materiałów. Z tych powodów niezbędne jest, aby używać zestawu słuchawkowego z jednorazowymi nakładkami higienicznymi marki FIM MEDICAL.

5.2. Użycie z urządzeniem Visiolite®

- ✓ Umieść urządzenie Visiolite na stole i podłącz jego zasilacz do sieci 230 V.
- ✓ Ustaw urządzenie VisioClick® po lewej lub po prawej stronie urządzenia Visiolite®.
- ✓ Podłącz VisioClick do komputera i do Visiolite®, jak wskazano w §3.1.4 niniejszej instrukcji.
- ✓ Uruchom oprogramowanie Visiolite® na komputerze. Urządzenia VisioClick® i Visiolite® powinny zostać wykryte i być gotowe do użycia.

Urządzenie VisioClick® zostało zaprojektowane do współpracy z urządzeniem Visiolite® i powiązanym oprogramowaniem. Konieczne jest przeczytanie odpowiedniego paragrafu w podręczniku użytkownika oprogramowania Visiolite® w celu konfiguracji i eksploatacji VisioClick® z Visiolite®. Podręcznik użytkownika oprogramowania Visiolite® znajduje się na CD dołączonym do VisioClick®.

Przypomnienie: urządzenie VisioClick® jest kompatybilne z urządzeniem Visiolite® v4 od wersji v05.00.00 oprogramowania Visiolite®.

6. Obsługa - Konserwacja

6.1. Czyszczenie obudowy

Ze względów higienicznych po każdym badaniu konieczne jest odkażenie powierzchni urządzenia VisioClick®, które znalazły się w kontakcie ze skórą (obudowa). Obudowę można czyścić szmatką zwilżoną środkiem bakteriobójczym zatwierdzonym przez firmę FIM MEDICAL (patrz lista §6.3).

- ➡ **Uwaga:** Nigdy nie sterylizować urządzenia VisioClick® ani jego akcesoriów
- ➡ **Uwaga:** Nie wolno czyścić VisioClick® pod bieżącą wodą lub bezpośrednio zanurzać urządzenia w jakimkolwiek płynie.
- ➡ W przypadku uszkodzenia obudowy skontaktuj się z firmą FIM MEDICAL lub z dystrybutorem celem wymiany sprzętu.

6.2. Czyszczenie zestawu słuchawkowego

Ze względów higienicznych ważne jest, aby odkażać powierzchnie zestawu słuchawkowego (nauszniki, pałąk) za pomocą szmatki nasączonej środkiem bakteriobójczym i grzybobójczym zatwierdzonym przez firmę FIM MEDICAL (patrz lista §6.3).

- ➡ **Uwaga:** Stosowanie nakładek jednorazowego użytku nie zwalnia z konieczności odkażania sprzętu.
- ➡ **Uwaga:** Nigdy nie sterylizuj zestawu słuchawkowego
- ➡ **Uwaga:** Zestawu słuchawkowego nie wolno czyścić pod bieżącą wodą lub bezpośrednio zanurzać w jakimkolwiek płynie.
- ➡ W przypadku uszkodzenia zestawu słuchawkowego skontaktuj się z firmą FIM MEDICAL lub dystrybutorem celem wymiany sprzętu.

6.3. Lista ogólnodostępnych środków bakteriobójczych i grzybobójczych zatwierdzonych przez firmę FIM MEDICAL

Ze względu na dużą liczbę marek i kategorii dostępnych na rynku chusteczek odkażających firma FIM MEDICAL zatwierdziła listę produktów, które nie wpływają negatywnie na wygląd i odporność tworzyw sztucznych stosowanych w nausznikach jej urządzeń.

Do odkażania swoich wyrobów firma FIM MEDICAL zatwierdza stosowanie wymienionych poniżej produktów oraz nasączonych chusteczek lub ściereczek:

- Alkohol izopropylowy 70%
- Chusteczki dezynfekujące Bactynil®
- Clorox® Healthcare Bleach
- Sani-Cloth® Bleach
- Sani-Cloth® Plus
- Sani-Cloth® HB
- Super Sani-Cloth®
- Sanicloth® AF3
- Formula 409®
- Virex® Plus

6.4. W razie problemów

W przypadku wystąpienia usterki sprawdź połączenia USB z komputerem i urządzeniem FIM MEDICAL. Sprawdź, czy sterowniki zostały poprawnie zainstalowane na komputerze i czy urządzenie zostało wykryte. W razie potrzeby jeszcze raz zainstaluj dostarczone oprogramowanie i ponownie uruchom komputer.

Sekcja FAQ zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jeśli mimo to urządzenie odmawia pracy, odłącz je i odstaw, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu wraz z kablem i akcesoriami. Serwis posprzedażny firmy FIM MEDICAL lub dystrybutor (jeśli jest autoryzowany przez FIM MEDICAL) są do Twojej dyspozycji w celu podjęcia działań konserwacyjnych.

6.5. Gwarancja

Urządzenia VisioClick® objęte są **2-letnią** gwarancją.

Gwarancja na zestaw słuchawkowy obowiązuje przez **1 rok**.

W ramach umowy gwarancyjnej pokrywane są jedynie koszty napraw. Gwarancja ma zastosowanie jedynie wówczas, gdy spełniono ogólne warunki użytkowania urządzenia.

6.6. Recykling i wycofanie z użytku

Urządzenie VisioClick® i wszystkie jego akcesoria muszą zostać zwrócone do firmy FIM MEDICAL w przypadku zakończenia użytkowania. Firma FIM MEDICAL zajmie się jego recyklingiem i zniszczeniem.

Urządzenie może być również oddane do systemu recyklingu urządzeń elektronicznych zapewniającego niewielki wpływ na środowisko.

Jednorazowe nakładki higieniczne muszą stanowić przedmiot oddzielnej zbiórki odpadów biologicznie skażonych (medycznych odpadów zakaźnych).

7. FAQ

7.1. Nie słyszysz żadnego dźwięku

- Sprawdź, czy kabel USB został prawidłowo podłączony do komputera i złącza (3) urządzenia VisioClick®.
- Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony do złącza (1) VisioClick®.
- Upewnij się, że zestaw słuchawkowy działa z innym źródłem dźwięku (na przykład z komputerem), a następnie podłącz go ponownie do urządzenia VisioClick®.
- Sprawdź ustawienia regulacji głośności w oprogramowaniu Visiolite. W tym celu zapoznaj się z podręcznikiem użytkownika Visiolite®.
- Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z działem obsługi posprzedażnej firmy FIM MEDICAL lub z dystrybutorem (jeśli uzyskał autoryzację serwisową firmy FIM MEDICAL).

7.2. Czy mogę użyć innego zestawu słuchawkowego niż ten dostarczony przez firmę FIM MEDICAL?

- Można stosować inne dostępne na rynku zestawy słuchawkowe, o ile spełniają one wymagania techniczne określone w §1.3. (zakres impedancji, format złączy itp.).
- Nauszniki innego zestawu słuchawkowego muszą również mieć średnicę 70 mm, co pozwoli stosować jednorazowe nakładki higieniczne opracowane przez firmę FIM MEDICAL (nr kat. SS1105).
-

7.3. Czy mogę podłączyć urządzenie inne niż Visiolite do portu USB urządzenia VisioClick®?

- VisioClick® jest przeznaczony wyłącznie do użytku z testerem widzenia Visiolite® lub innym autoryzowanym urządzeniem FIM MEDICAL.
- Wszelkie podłączanie do urządzeń innych marek jest niedozwolone.



*Dziękujemy za zapoznanie się z podręcznikiem
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z
naszą firmą.*



FIM MEDICAL

51 rue Antoine Primat 69100 Villeurbanne Cedex- FRANCJA

Nr tel.: (+33)04 72 34 89 89 - Fax: (+33)04 72 33 43 51

contact@fim-medical.com / www.fim-medical.com