

Εγχειρίδιο Χρήσης

VisioClick®



ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Εισαγωγή	4
1.1. Κατάλογος του παρεχόμενου εξοπλισμού	5
1.2. Παρουσίαση	5
1.3. Τεχνικά χαρακτηριστικά	6
1.4. Σύμβολα	7
2. Ασφάλεια	8
2.1. Γενικότητες	9
2.2. Χρήστες	10
2.3. Ιατρικές αντενδείξεις	10
2.4. Προλήψεις πριν από την εξέταση	10
3. Εγκατάσταση	11
3.1. Διαδικασία εγκατάστασης του εξοπλισμού	12
3.1.1. Αφαίρεση συσκευασίας	12
3.1.2. Ονοματολογία	12
3.1.3. Τρόπος λειτουργίας	13
3.1.4. Συναρμολόγηση και σύνδεση	13
3.2. Συμβατά λειτουργικά συστήματα	14
3.3. Χρήση του λογισμικού της συσκευής FIM	14
4. Διαθέσιμα εξαρτήματα	15
4.1. Σκουφάκια υγιεινής μίας χρήσης (αναφ. SS1105)	16
4.2. Ακουστικό κεφαλής (αναφ. SS1104)	16
4.3. Καλώδιο USB (αναφ. SS1103)	16
5. Χρήση	17
5.1. Τοποθέτηση των σκουφακιών υγιεινής μίας χρήσης	18
5.2. Χρήση με ένα Visiolite®	18
6. Συντήρηση - Επισκευή	19
6.1. Καθαρισμός κουτιού	20
6.2. Καθαρισμός του ακουστικού κεφαλής	20
6.3. Κατάλογος των γενόσημων αντιβακτηριαδικών μυκητοκτόνων εγκεκριμένων από την FIM MEDICAL	20
6.4. Σε περίπτωση βλάβης	21

6.5.	Εγγύηση _____	21
6.6.	Ανακύκλωση - Τέλος ζωής _____	21
7.	Συχνές ερωτήσεις _____	22
7.1.	Δεν έχετε κανέναν ήχο _____	23
7.2.	Μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλο ακουστικό κεφαλής εκτός από αυτό που παρέχεται από την FIM MEDICAL; _____	23
7.3.	Μπορώ να συνδέσω μια άλλη συσκευή εκτός από το Visiolite στη θήρα USB του VisioClick®; _____	23

1. Εισαγωγή

1.1. Κατάλογος του παρεχόμενου εξοπλισμού

Κατά την αφαίρεση συσκευασίας, θα έχετε τον ακόλουθο εξοπλισμό:

- Συσκευή VisioClick®
- 1 καλώδιο USB (μήκος του καλωδίου 1 μ.)
- 1 ακουστικό κεφαλής (βύσμα σύνδεσης 3,5 χιλ., μήκος καλωδίου 1,2 μ.)
- 1 μεταλλική βάση ακουστικών
- CD Rom που περιλαμβάνει το εγχειρίδιο χρήσης του VisioClick® καθώς και το λογισμικό VISIOLITE®
- Ενημερωτικό σημείωμα
- Θήκη μεταφοράς

Σημείωση: Το VisioClick® πρέπει να επιστρέφεται στο Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης (για επισκευή) στην αρχική του συσκευασία. Στην περίπτωση μιας επισκευής που καλύπτεται από την εγγύηση, αυτή δεν θα ληφθεί υπόψη αν απουσιάζει η αρχική συσκευασία.

1.2. Παρουσίαση

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης μέχρι τέλος πριν από κάθε χρήση του εξοπλισμού.

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης απευθύνεται στους χρήστες της συσκευής όρασης Visiolite® που συνοδεύεται από την αυτόματη λύση VisioClick®. Η αυτόματη λύση VisioClick® είναι συμβατή με τις ενημερωμένες (από το 2012) συσκευές όρασης Visiolite® V4 και την έκδοση v5 του λογισμικού Visiolite®.

Το VisioClick® είναι μια συσκευή που επιτρέπει την αυτοματοποίηση της συσκευής όρασης VISIOLITE®. Η αρχή λειτουργίας της παρούσας συσκευής είναι να δίνει φωνητικά σήματα στον ασθενή μέσω ακουστικών κεφαλής, να καταγράφει τις απαντήσεις του μέσω ενός πλήκτρου, και να προωθεί την επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή και της συσκευής ανίχνευσης FIM MEDICAL.

Το VisioClick® αποτελείται από ένα κουτί απάντηση (κέλυφος) και από ένα ακουστικό κεφαλής. Η συσκευή συνδέεται σε υπολογιστή μέσω μιας πρώτης σύνδεσης USB και στη συσκευή όρασης Visiolite® μέσω μιας δεύτερης σύνδεσης USB. ο χειριστής ελέγχει τη συσκευή μέσω του λογισμικού Visiolite®.

Το VISIOCLICK® είναι μια νέα συσκευή στόχος της οποίας είναι να ανακουφίσει τη δραστηριότητα των επαγγελματιών υγείας κάνοντας ένα ασθενή αυτόνομο κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης. Ο επαγγελματίας θα μπορεί να συγκεντρωθεί σε άλλες εργασίες κατά τη διάρκεια ενός ή πολλαπλών ταυτόχρονων εξετάσεων ασθενών. Επίσης, το VisioClick® δίνει τη δυνατότητα παραγωγής ήχων στη γλώσσα του ασθενή που παρουσιάζεται στις δοκιμές.

Η παρουσία του επαγγελματία σε κοντινή απόσταση είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια όλης της δοκιμής.

1.3.Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικά του VisioClick®:	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	Μεταξύ -10 και 60°C
Θερμοκρασία χρήσης	Μεταξύ 15 και 35°C
Υγρασία	75% μέγιστο
Υψόμετρο λειτουργίας	< 2000 μέτρα
Τάση	5VDC (μέσω θήρας USB)
Ισχύς	2.5W μέγιστο
Σύνθετη αντίσταση εξόδου	16 Ω - 32 Ω
Ακουστικό βύσμα	3,5 χιλ.
Πρότυπα αναφοράς	IEC 60601-1, IEC 60601-1-2
Ιατρική κλάση	I (κανόνας 12)
Κλάση ασφαλείας του υλικολογισμικού	A
Ηλεκτρική κλάση	Κλάση I
Εφαρμοζόμενο μέρος	Τύπος BF
Κωδικός GMDN	
Διαστάσεις	250x140x50 χιλ. (εκτός της βάσης ακουστικών)
Βάρος της συσκευής	476 γρ. (μόνο το κουτί) 706 γρ. (με το καλώδιο + βάση+ ακουστικά)

Έτος 1ης σήμανσης ΕΚ: 2019

Χαρακτηριστικά του παρεχόμενου ακουστικού: (Αναφ. SS1104)	
Μήκος καλωδίου	1,2 μ.
Διάμετρος κελυφών	70 χιλ.
Σύνθετη αντίσταση	32 Ω
Εύρος συχνότητας	20 Hz - 20 KHz
Βύσμα	Βύσμα ήχου 3,5 χιλ. στερεοφωνικό 3 πόλοι (TRS)

1.4.Σύμβολα

Οι ετικέτες περιλαμβάνουν τις ακόλουθες σημάνσεις:



Σήμανση ΕΚ της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ



Εφαρμοζόμενο μέρος τύπου ΒF



Δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα κανονικά οικιακά απόβλητα. Για να απορρίψετε αυτό το προϊόν στο τέλος ζωής του, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.



Συμβουλευτείτε τα συνοδευτικά έγγραφα

SN

Αριθμός σειράς



Ταυτοποίηση του κατασκευαστή



Να μην επαναχρησιμοποιείται. Μίας χρήσης

2. Ασφάλεια

2.1.Γενικότητες

Προσοχή:

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα καλώδια που παρέχονται από την FIM MEDICAL
- Μην αποσυναρμολογείτε ή παρεμβαίνετε στη συσκευή. Μόνο το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της FIM MEDICAL και οι εξουσιοδοτημένοι διανομείς είναι πιστοποιημένοι για να παρέμβουν στον εξοπλισμό
- Να μην συνδέετε ή χρησιμοποιείτε το Visiolite® σε εκρηκτική ατμόσφαιρα ή παρουσία αναισθητικών αερίων
- Μην τραβάτε τα καλώδια
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένα καλώδια
- Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση του εξοπλισμού
- Σε περίπτωση ζημιάς λόγω ατυχήματος (πτώση ή κραδασμός), αποστείλατε τη συσκευή στο Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της FIM MEDICAL ή στον διανομέα σας αν είναι εξουσιοδοτημένος από την FIM MEDICAL για τη συντήρηση
- Μην βρέχετε τη συσκευή, να την προστατεύετε από κάθε εκτόξευση υγρού. Μην καθαρίζετε ποτέ το Visiolite® με πολύ νερό ή ψεκάζετε απευθείας τη συσκευή με υγρό
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια
- Σε περίπτωση εμφανούς φθοράς της συσκευής ή των εξαρτημάτων της, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της FIM MEDICAL ή τον διανομέα σας.
- Το VisioClick® προβλέπεται για χρήση με τη συσκευή όρασης Visiolite® ή με κάθε άλλη εγκεκριμένη από την FIM MEDICAL συσκευή. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη σύνδεση σε τρίτες συσκευές.
- Απαιτείται ένας οπτικός έλεγχος και ένας έλεγχος καλής λειτουργίας του εξοπλισμού πριν από κάθε χρήση και μετά από κάθε δοκιμή.
- Η βάση του ακουστικού δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται κατά τη διάρκεια μιας εξέτασης. Φροντίστε να μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Για την αποφυγή προβλημάτων παρέμβασης ηλεκτρομαγνητικής ή άλλης προέλευσης με άλλες συσκευές, μην χρησιμοποιείτε το VisioClick® σε διαταραγμένο περιβάλλον ή πολύ κοντά σε άλλες συσκευές.
- Για λόγους ασφαλείας, η πρόσβαση στη σύνδεση του καλωδίου USB στον υπολογιστή ή στη συσκευή πρέπει να είναι ελεύθερη.
- Αποφεύγετε να χρησιμοποιείται το VisioClick® σε θορυβώδες περιβάλλον που εμποδίζει την καλή κατανόηση των φωνητικών οδηγιών από το ακουστικό κεφαλής.
- Αν και η συσκευή VisioClick® προσφέρει κάποια αυτονομία στον ασθενή, ένας επαγγελματίας υγείας πρέπει να είναι πάντα παρών σε κοντινή απόσταση για να ελέγχει τη σωστή διεξαγωγή των δοκιμών.
- Το VisioClick® είναι ένα Ιατροτεχνολογικό Προϊόν σύμφωνα με τους όρους της νομοθεσίας που ισχύουν για αυτό. Η σύνδεσή του σε υπολογιστή μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC60950 σχετικά με την ασφάλεια των εξοπλισμών επεξεργασίας δεδομένων

Προσοχή: για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων βιοσυμβατότητας προϊόντων του ISO 10993, είναι υποχρεωτικό να χρησιμοποιείτε σκουφάκια υγιεινής μίας χρήσης της μάρκας FIM MEDICAL μαζί με τα ακουστικά κεφαλής.

2.2.Χρήστες

Το VisioClick® απευθύνεται αποκλειστικά στους επαγγελματίες υγείας (νοσοκόμες, ιατρούς, οφθαλμιάτρους, οπτικούς...) χρήστες της συσκευής όρασης Visiolite® και του λογισμικού της.

Όσον αφορά το επίπεδο σπουδών των επαγγελματιών υγείας, η συσκευή δεν παρουσιάζει καμία δυσκολία στη χρήση της.

Ο χειριστής πρέπει να είναι αρκετά εκπαιδευμένος στη χρήση υπολογιστών και του σχετικού λειτουργικού συστήματος.

Ο χειριστής πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένος με τους κανόνες υγιεινής και βακτηριακής μόλυνσης.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, ο επαγγελματίας υγείας πρέπει να ανατρέξει στο εγχειρίδιο χρήσης ή/και να επικοινωνήσει με την εταιρεία FIM MEDICAL ή τον διανομέα της.

2.3.Ιατρικές αντενδείξεις

Το VisioClick® λειτουργεί με τη συσκευή όρασης VISIOLITE®, οι ιατρικές αντενδείξεις που εφαρμόζονται είναι εκείνες που συνδέονται με τη συσκευή όρασης VISIOLITE®. Ανατρέξτε στο §2.3 του εγχειριδίου χρήσης του VISIOLITE®.

Το VisioClick® είναι μια ακουστική συσκευή που διαθέτει ακουστικό κεφαλής για την εκφώνηση των φωνητικών εντολών. Βεβαιωθείτε πως ο ασθενής είναι ικανός να καταλάβει τις οδηγίες στην επιλεγμένη γλώσσα και είναι σε θέση να ανεχθεί ένα ακουστικό κεφαλής.

Τα ακουστικά βαρηκοΐας δεν επιτρέπονται κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

2.4.Προλήψεις πριν από την εξέταση

Πριν από τη χρήση της συσκευής VisioClick®, ο χειριστής πρέπει να ενημερώσει και εξηγήσει στον ασθενή τη λειτουργία του αυτοματισμού (ακρόαση των οδηγιών, απαντήσεις....). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο ρήσης του VISIOLITE®

3. Εγκατάσταση

3.1. Διαδικασία εγκατάστασης του εξοπλισμού

3.1.1. Αφαίρεση συσκευασίας

Αφαιρέστε από το κουτί του τον φάκελο που περιλαμβάνει τα μέρη του VisioClick®.

Σας συνιστούμε να διατηρήσετε την αρχική συσκευασία του Visiolite® ανέπαφη για μια μετέπειτα λειτουργία συντήρησης.



Εικόνα 1 Άνοιγμα της αρχικής συσκευασίας του VisioClick®

3.1.2. Ονοματολογία



Εικόνα 2 Το VisioClick® και τα εξαρτήματά του

1 Το κουτί

Το κουτί του VisioClick® αποτελείται από μία βάση πάνω στην οποία τοποθετείται το στήριγμα του ακουστικού, από ένα λειτουργικό μέρος κουμπί απάντηση και από ένα συνδετικό μέρος.

2 Το στήριγμα του ακουστικού κεφαλής

Το στήριγμα ακουστικού κεφαλής μπορεί να συναρμολογηθεί για να τοποθετείται το ακουστικό όταν δεν χρησιμοποιείται.

3 Το ακουστικό κεφαλής

Το ακουστικό συνδέεται στη βάση VisioClick® και επιτρέπει τη λήψη οδηγιών κατά την πραγματοποίηση δοκιμών.

4 Το καλώδιο USB

Το καλώδιο USB διασφαλίζει τη σύνδεση σε άλλη συσκευή ή στον υπολογιστή. Αυτό λειτουργεί σαν τροφοδοτικό για το VisioClick®.

3.1.3. Τρόπος λειτουργίας



Εικόνα 3 Σχεδιάγραμμα του τρόπου λειτουργίας του VisioClick®

3.1.4. Συναρμολόγηση και σύνδεση



Εικόνα 4 Εγκατάσταση του στηρίγματος του ακουστικού κεφαλής


- Εισάγετε τους βραχίονες του στηρίγματος ακουστικού κεφαλής στις 2 υποδοχές της βάσης που προβλέπονται για τον σκοπό αυτό. Ο κρίκος ή θηλιά για την τοποθέτηση ακουστικού πρέπει να έχει κατεύθυνση προς τον χρήστη. Βεβαιωθείτε πως οι βραχίονες έχουν εισχωρήσει τελείως και πως το στηρίγμα διατηρείται στη θέση του.



Εικόνα 5 Οπίσθια πλευρά - Συνδετικό στηρίγμα

- 1 Καλώδιο ακουστικού κεφαλής
- 2 Καλώδιο USB προς συσκευή FIM
- 3 Καλώδιο USB προς υπολογιστή

- Συνδέστε το καλώδιο του ακουστικού στην πρίζα (1) της βάσης VisioClick®. Στη συνέχεια ακουμπήστε το ακουστικό στη βάση του.

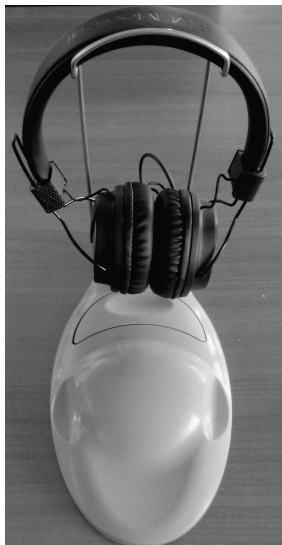

Εικόνα 6 Το VisioClick® με το ακουστικό του σωστά τοποθετημένο στη βάση

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB ενός 1 μ. που παρέχεται με το VisioClick® για να συνδέσετε το Visiolite® στο VisioClick®. Το επίπεδο τμήμα του καλωδίου συνδέεται στο VisioClick® (2) ενώ το τετράγωνο τμήμα συνδέεται στο Visiolite®.
Προσοχή: είναι ωστόσο απαραίτητο να συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας του Visiolite®. Βλέπε το εγχειρίδιο χρήσης του Visiolite®.
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB 3 μ. που παρέχεται με το Visiolite® για να συνδέσετε το VisioClick® στον υπολογιστή. Το τετράγωνο τμήμα του καλωδίου συνδέεται στο VisioClick® (3) ενώ το επίπεδο τμήμα συνδέεται στον υπολογιστή.

3.2. Συμβατά λειτουργικά συστήματα

Το VisioClick® λειτουργεί με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: **Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 και Windows 10.**

3.3. Χρήση του λογισμικού της συσκευής FIM

Το VisioClick® προβλέπεται για να χρησιμοποιηθεί βάσει του λογισμικού που σχεδιάστηκε για τη συσκευή FIM στην οποία είναι συνδεδεμένο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του τελευταίου για τη χρήση της λογισμικής διεπαφής.

Για να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του VisioClick®, είναι απαραίτητο να γίνει ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής FIM (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συνδεδεμένης συσκευής).

4. Διαθέσιμα εξαρτήματα

4.1. Σκουφάκια υγιεινής μίας χρήσης (αναφ. SS1105)

Η εταιρεία FIM MEDICAL ανέπτυξε ειδικά σκουφάκια υγιεινής μίας χρήσης για χρήση με το ακουστικό κεφαλής που παρέχεται με το VisioClick®.

Προσοχή: Αυτά τα σκουφάκια υγιεινής μίας χρήσης πρέπει να χρησιμοποιούνται συστηματικά σε κάθε εξέταση και να αντικαθίστανται μεταξύ κάθε ασθενή

Προσοχή: Για λόγους υγιεινής και βιοσυμβατότητας, με τα ακουστικά κεφαλής είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται τα σκουφάκια υγιεινής μίας χρήσης της μάρκας FIM MEDICAL.

Αυτά τα σκουφάκια σχεδιάστηκαν ειδικά για να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις βιοσυμβατότητας των προϊόντων του ISO 10993 καθώς και στις διαστάσεις του ακουστικού κεφαλής που παρέχεται με το VisioClick®.

Αν επιθυμείτε σκουφάκια υγιεινής μίας χρήσης FIM MEDICAL, επικοινωνήστε με την εταιρεία FIM MEDICAL ή τον διανομέα σας. Θα σας προτείνουν διάφορες συσκευασίες.

4.2. Ακουστικό κεφαλής (αναφ. SS1104)

Η εταιρεία FIM MEDICAL πουλάει μαζί με το VisioClick® ένα ακουστικό κεφαλής του οποίου τα χαρακτηριστικά καθορίζονται στο §1.2.

Ένα άλλο ακουστικό του εμπορίου μπορεί να ταιριάζει και να πληρεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο §1.2. (Εύρος αντίστασης, μορφή σύνδεσης...) και υπό τον όρο ότι τηρεί μια διάμετρο κελύφους 70 χιλ. ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκουφάκια υγιεινής μίας χρήσης ειδικά σχεδιασμένα από την FIM MEDICAL (Αναφ. SS1105).

Προσοχή: Για λόγους υγιεινής και βιοσυμβατότητας, με τα ακουστικά κεφαλής είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται τα σκουφάκια υγιεινής μίας χρήσης της μάρκας FIM MEDICAL (Αναφ. SS1105)

Αυτά τα σκουφάκια σχεδιάστηκαν ειδικά για να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις βιοσυμβατότητας των προϊόντων του ISO 10993 καθώς και στις διαστάσεις του ακουστικού κεφαλής που παρέχεται με το VisioClick®.

Αν επιθυμείτε ένα ακουστικό κεφαλής, επικοινωνήστε με την εταιρεία FIM MEDICAL ή τον διανομέα σας.

4.3. Καλώδιο USB (αναφ. SS1103)

Η εταιρεία FIM MEDICAL πουλάει με το VisioClick® ένα καλώδιο USB τύπου A προς τύπο B μήκους 1 μ.

5. Χρήση

5.1. Τοποθέτηση των σκουφακιών υγιεινής μίας χρήσης



Εικόνα 7 Τοποθέτηση του σκουφακιού υγιεινής στο ακουστικό της κεφαλής

- ✓ Τοποθετήστε τα σκουφάκια υγιεινής μίας χρήσης σε κάθε ακουστικό (πλευρά ηχείου).
- ✓ Ρυθμίστε τα σκουφάκια για να μην έχετε πλεόνασμα που οφείλεται σε ενδεχόμενες τσακίσεις μεταξύ του ακουστικού κεφαλής και του ασθενή.

Υπενθύμιση: Αυτά τα σκουφάκια υγιεινής μίας χρήσης πρέπει να χρησιμοποιούνται συστηματικά σε κάθε εξέταση και να αντικαθίστανται μεταξύ κάθε ασθενή.

Αυτά τα σκουφάκια σχεδιάστηκαν ειδικά για να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις βιοσυμβατότητας των προϊόντων του ISO 10993 καθώς και στις διαστάσεις του ακουστικού κεφαλής. Για λόγους υγιεινής, με τα ακουστικά κεφαλής είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται τα σκουφάκια υγιεινής μίας χρήσης της μάρκας FIM MEDICAL.

5.2. Χρήση με ένα Visiolite®

- ✓ Τοποθετήστε το Visiolite στο τραπέζι, και συνδέστε το σύστημα τροφοδοσίας στο δίκτυο 230V.
- ✓ Τοποθετήστε το VisioClick® αριστερά ή δεξιά του Visiolite®.
- ✓ Συνδέστε το VisioClick στον υπολογιστή και στο Visiolite® όπως αναφέρεται στο §3.1.4 του παρόντος εγχειριδίου.
- ✓ Θέστε σε λειτουργία το λογισμικό Visiolite® στον υπολογιστή. Το VisioClick® και το Visiolite® θα πρέπει να ανιχνευτούν και να είναι έτοιμα προς χρήση.

Η συσκευή VisioClick® είναι σχεδιασμένη για να λειτουργεί με τη συσκευή Visiolite® και το σχετικό λογισμικό. Είναι απαραίτητο να διαβάσετε τη σχετική παράγραφο στο εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού Visiolite® όσον αφορά τη βαθμονόμηση και τη χρήση του VisioClick® με ένα Visiolite®. Το εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού Visiolite® παρέχεται με το CD που περιλαμβάνεται με το VisioClick®

Υπενθύμιση: Η συσκευή VisioClick® είναι συμβατή με τη συσκευή Visiolite® v4 από την έκδοση v05.00.00 του λογισμικού Visiolite®.

6. Συντήρηση - Επισκευή

6.1.Καθαρισμός κουτιού

Για λόγους υγιεινής, είναι αναγκαίο, μεταξύ κάθε εξέτασης, να απολυμαίνετε τις επιφάνειες του VisioClick® που έρχονται σε επαφή με το δέρμα (κουτί). Το κουτί μπορεί να καθαριστεί με τη βοήθεια ενός εμποτισμένου με αντιβακτηριδιακό μυκητοκτόνο πανιού εγκεκριμένο από την FIM MEDICAL (βλέπε κατάλογο §6.3).

- ➡ **Προσοχή:** Μην αποστειρώνετε ποτέ το VisioClick® ή τα εξαρτήματά του.
- ➡ **Προσοχή:** Μην καθαρίζετε ποτέ το VisioClick® με πολύ νερό ή μην το βυθίζεται απευθείας με οποιοδήποτε υγρό.
- ➡ Σε περίπτωση φθοράς του κουτιού επικοινωνήστε με την εταιρεία FIM MEDICAL ή τον διανομέα σας για αλλαγή προϊόντος.

6.2.Καθαρισμός του ακουστικού κεφαλής

Για λόγους υγιεινής είναι σημαντικό να απολυμαίνονται οι επιφάνειες του ακουστικού κεφαλής (κέλυφος, τόξο) με τη βοήθεια ενός πανιού εμποτισμένου με αντιβακτηριδιακό μυκητοκτόνο προϊόν εγκεκριμένο από την FIM MEDICAL (βλέπε κατάλογο §6.3).

- ➡ **Προσοχή:** Η χρήση σκουφακιών μίας χρήσης δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να απολυμαίνεται ο εξοπλισμός.
- ➡ **Προσοχή:** Να μην αποστειρώνετε ποτέ το ακουστικό
- ➡ **Προσοχή:** Μην καθαρίζετε ποτέ το ακουστικό κεφαλής με πολύ νερό ή μην το βυθίζετε απευθείας σε οποιοδήποτε υγρό.
- ➡ Σε περίπτωση φθοράς του ακουστικού κεφαλής επικοινωνήστε με την εταιρεία FIM MEDICAL ή τον διανομέα σας για αλλαγή προϊόντος.

6.3.Κατάλογος των γενόσημων αντιβακτηριαδικών μυκητοκτόνων εγκεκριμένων από την FIM MEDICAL

Λόγω του ότι υπάρχουν στην αγορά πολλές μάρκες και παραπομπές υγρών μαντηλιών απολύμανσης, η εταιρεία FIM MEDICAL ενέκρινε για τα προϊόντα της παραπομπές που δεν αλλάζουν ούτε την όψη ούτε την ανθεκτικότητα των πλαστικών υλικών των κελυφών αυτών των συσκευών.

Η εταιρεία FIM MEDICAL εγκρίνει, για την απολύμανση των προϊόντων της, τη χρήση των παρακάτω ημι-υγρών μαντηλιών ή πανιών:

- Ισοπροπυλική αλκοόλη 70%
- Απολυμαντικά μαντηλάκια Bactynil®
- Clorox® Healthcare Bleach
- Sani-Cloth® Bleach
- Sani-Cloth® Plus
- Sani-Cloth® HB
- Super Sani Cloth®
- Sanicloth® AF3
- Formula 409®
- Virex® Plus

6.4. Σε περίπτωση βλάβης

Αν προκύψει βλάβη, ελέγξτε τις συνδέσεις USB στον υπολογιστή και στη συσκευή FIM MEDICAL. Βεβαιωθείτε πως τα προγράμματα οδήγησης έχουν εγκατασταθεί σωστά στον υπολογιστή και πως η συσκευή αναγνωρίζεται. Αν χρειάζεται επανεγκαταστήστε το λογισμικό που παρέχεται και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.

Το κεφάλαιο Συχνές ερωτήσεις δίνει κάποιες απαντήσεις στις άλλες απαντήσεις που θέτονται πιο συχνά.

Αν παρ' όλ' αυτά η συσκευή δεν λειτουργεί, αποσυνδέστε την και βάλτε την στην άκρη αν είναι δυνατόν στην αρχική της συσκευασία με το καλώδιο της και τα εξαρτήματα. Η Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της FIM MEDICAL ή ο διανομέας σας (αν έχει εξουσιοδοτηθεί από την FIM MEDICAL) είναι στη διάθεσή σας για την επισκευή.

6.5. Εγγύηση

Το VisioClick® έχει εγγύηση **2 ετών**.

Το ακουστικό κεφαλής έχει εγγύηση **1 έτους**.

Στο πλαίσιο της εγγύησης σύμβασης, αναλαμβάνονται μόνο οι επισκευές. Η εγγύηση θα ισχύει μόνο εφόσον έχουν τηρηθεί οι φυσιολογικές και συνήθεις συνθήκες χρήσης της συσκευής.

6.6. Ανακύκλωση - Τέλος ζωής

Το VisioClick® καθώς και όλα τα εξαρτήματά του πρέπει να επιστρέφονται στην FIM MEDICAL όταν σταματήσει η χρήση τους. Η FIM MEDICAL θα αναλάβει την ανακύκλωση και καταστροφή.

Μια θυγατρική ανακύκλωσης ηλεκτρονικών συσκευών που εξασφαλίζει μικρή επίπτωση στο περιβάλλον μπορεί μπορεί επίσης να αναλάβει τη συσκευή.

Τα σκουφάκια υγιεινής θα πρέπει ν' αποτελούν μέρος επιλεκτικής περισυλλογής για απορρίμματα βιολογικά μολυσμένα (DASRI).

7. Συχνές ερωτήσεις

7.1. Δεν έχετε κανέναν ήχο

- Ελέγξτε πως το καλώδιο USB είναι καλά συνδεδεμένο στον υπολογιστή και στο βύσμα (3) του VisioClick®.
- Ελέγξτε πως το ακουστικό κεφαλής είναι σωστά συνδεδεμένο στο βύσμα (1) του VisioClick®.
- Ελέγξτε πως το ακουστικό λειτουργεί με μια άλλη πηγή (στον υπολογιστή σας για παράδειγμα), και στη συνέχεια επανασυνδέστε το στο VisioClick®.
- Ελέγξτε τις παραμέτρους ρύθμισης ήχου στο λογισμικό Visiolite. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του Visiolite®.
- Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της FIM MEDICAL ή τον διανομέα σας (αν είναι εξουσιοδοτημένος από την FIM MEDICAL για την Τεχνική Υποστήριξη).

7.2. Μπορώ να χρησιμοποιήσω άλλο ακουστικό κεφαλής εκτός από αυτό που παρέχεται από την FIM MEDICAL;

- Ένα άλλο ακουστικό του εμπορίου μπορεί να ταιριάζει και να πληρεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο §1.2. (Εύρος αντίστασης, μορφή σύνδεσης, κλπ. ...).
- Το ακουστικό κεφαλής θα πρέπει να έχει μια διάμετρο κελύφους 70 χιλ. ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκουφάκια υγιεινής μίας χρήσης ειδικά σχεδιασμένα από την FIM MEDICAL (Αναφ. SS1105).
-

7.3. Μπορώ να συνδέσω μια άλλη συσκευή εκτός από το Visiolite στη θήρα USB του VisioClick®;

- Το VisioClick® προβλέπεται για χρήση μόνο με τη συσκευή όρασης Visiolite® ή με κάθε άλλη εγκεκριμένη από την FIM MEDICAL συσκευή.
- Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη σύνδεση σε τρίτες συσκευές.



*Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε το παρόν εγχειρίδιο
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε
να επικοινωνήσετε μαζί μας.*



FIM MEDICAL

51 rue Antoine Primat 69100 Villeurbanne Cedex- FRANCE

Τηλ: (+33)04 72 34 89 89 -Φαξ: (+33)04 72 33 43 51

contact@fim-medical.com / www.fim-medical.com