

DÉPISTEUR VISUEL



MOBILE,
SIMPLE,
EFFICACE

VISIOLITE® ACCESS

DÉPISTAGE VISUEL TOUT-EN-UN

- Utilisation autonome
- Léger, compact et facilement transportable
- Interface tactile intuitive
- Dépistage complet du champ visuel



CE





TECHNOLOGIE AVANCÉE POUR UN DÉPISTAGE VISUEL PROFESSIONNEL

Le **Visiolite® Access** a été spécifiquement conçu pour accompagner l'ensemble des acteurs impliqués dans la prévention visuelle. Il répond aux besoins des services de santé au travail, de la médecine préventive et de la santé publique, des administrations chargées du permis de conduire, ainsi que des équipes réalisant des dépistages visuels en milieu scolaire.

Grâce à sa technologie brevetée, il associe de manière unique précision, performance et simplicité d'utilisation. Il garantit ainsi des examens fiables dans tous les contextes : dépistages de masse, suivis de routine, évaluations individuelles ou campagnes de prévention. Cette capacité de dépistage complète fait du **Visiolite® Access** une solution polyvalente, adaptée à l'ensemble des situations.

Fiabilité maximale

Le dispositif assure une mesure précise de l'acuité visuelle et un dépistage efficace des principaux troubles visuels, garantissant des résultats fiables, y compris en cas d'utilisation intensive.

Ergonomie intuitive

Son interface tactile a été conçue pour optimiser l'efficacité de l'opérateur et permettre une prise en main rapide et sans effort, quel que soit l'environnement. Par ailleurs, le design enveloppant de la face avant crée un espace fermé, sans distraction, garantissant des conditions de test optimales pour chaque utilisateur.

Polyvalence professionnelle

Adapté aux environnements médicaux, mobiles ou scolaires, le **Visiolite® Access** s'intègre naturellement à toutes les missions de dépistage visuel.

DÉPISTAGE SANS ORDINATEUR & DONNÉES PROTÉGÉES

Conçu pour répondre aux exigences de sécurité des données et aux politiques de protection les plus strictes, le **Visiolite® Access** propose une gestion des informations de dépistage simplifiée, sans ordinateur :

- Résultats d'examens anonymisés et horodatés, intégrant une approche orientée cybersécurité.
- Aucune donnée stockée sur l'appareil (en mode manuel uniquement).
- Export des résultats au format PDF exclusivement via clé USB, garantissant une récupération simple et directe des données.

Ce fonctionnement respectueux de la confidentialité limite la conservation inutile des informations, tout en maintenant un dispositif performant et facile à utiliser.




SIMPLICITÉ & MOBILITÉ

Entièrement autonome, le **Visiolite® Access** ne nécessite ni ordinateur, ni logiciel, ni connexion réseau. Compact, léger (3,5 kg) et facile à transporter, il peut être utilisé partout, en toute simplicité — aussi bien en cabinet médical que lors d'interventions sur site.

UNE BANQUE DE TESTS PERSONNALISABLE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

L'univers **Visiolite® Access** propose une large gamme de tests permettant un dépistage complet de la fonction visuelle. Parce que votre métier évolue, et que vos besoins changent, nous évoluons avec vous.

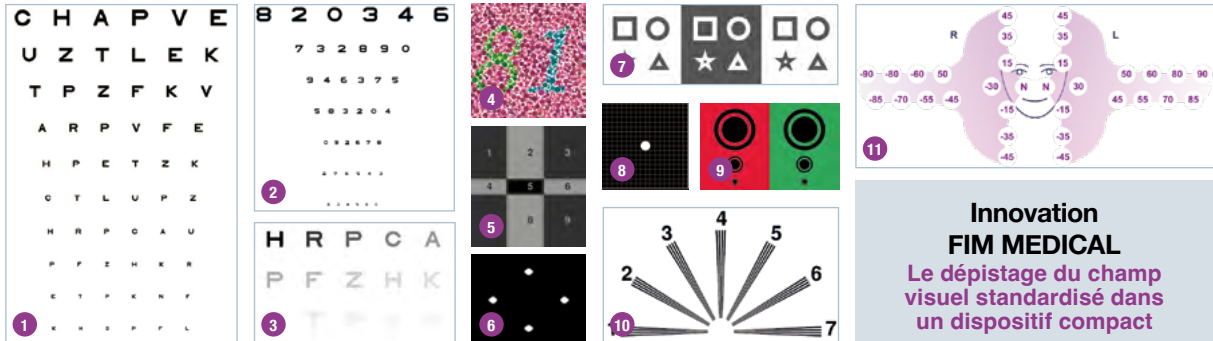

1-2. Acuité visuelle de 0,5 à 12,5/10, 3. Contraste, 4. Vision des couleurs, 5. Phories, 6. Fusion, 7. Relief, 8. Grille d'Amsler, 9. Duochrome, 10. Astigmatisme, 11. Champ visuel périphérique

**Innovation
FIM MEDICAL**
Le dépistage du champ visuel standardisé dans un dispositif compact

TEST DU CHAMP VISUEL PÉRIPHÉRIQUE

Grâce à un total de 32 stimuli lumineux, le **Visiolite® Access** permet d'explorer : le champ horizontal (180°), le champ vertical ($\pm 45^\circ$), le champ nasal ($\pm 30^\circ$), conformément à la majorité des exigences réglementaires liées à l'aptitude à la conduite.

La sensibilité à l'éblouissement apparaît lorsque la quantité de lumière perçue dépasse la capacité de tolérance de l'œil.




LE SAVIEZ-VOUS ?

À 130 km/h, le champ visuel se rétrécit jusqu'à 30° seulement. Ce phénomène concerne tout le monde, pas uniquement les conducteurs professionnels. L'allongement du temps de récupération peut être lié à de multiples facteurs.

ENSEMBLE COMPLET DE TESTS ADAPTÉS AUX ENFANTS

Le **Visiolite® Access** propose une large sélection de tests, développés et validés par des spécialistes, permettant de dépister les principaux troubles visuels en moins de 5 minutes. Ces tests sont spécifiquement conçus pour les enfants à partir de 3 ans.

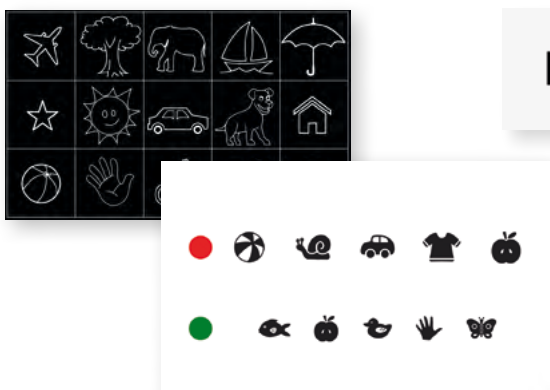

CRÉEZ VOTRE PROPRE COMBINAISON DE TESTS POUR UNE SOLUTION SUR MESURE

Acuité visuelle – ABC
Acuité visuelle – 123
Acuité visuelle – E de Raskin
Acuité visuelle – Anneaux de Landolt (4 positions / 8 positions)
Grille d'Amstler
Astigmatisme
Basse vision – ABC (monoculaire)
Basse vision – Anneaux de Landolt (8 positions) (monoculaire)
Champ visuel complet
Duochrome rouge/vert
Fusion
Hypermétropie – ABC + 1 θ
Hypermétropie – E + 1 θ
Hypermétropie – Anneaux de Landolt (4 positions) + 1 θ
Vision mésopique
Vision mésopique – Anneaux de Landolt (8 positions)
Phories
Vision des couleurs standard
Perception du relief
Sensibilité à l'éblouissement
Sensibilité au contraste – ABC
Sensibilité au contraste – Anneaux de Landolt (8 positions)
Acuité visuelle pédiatrique (DAVL)
Phories pédiatriques

Plusieurs distances de test sont disponibles selon les examens sélectionnés. Pour une configuration personnalisée, merci de nous contacter.

VOTRE DISTRIBUTEUR



MODULAIRE & ADAPTABLE

Le **Visiolite® Access** s'adapte à toutes vos conditions d'examen. Compact et modulaire, il peut être posé sur une table ou fixé au bord d'un bureau à l'aide d'un support VESA pliable standard grâce au clip VESA en option. Une solution flexible et ergonomique, conçue pour optimiser votre espace de travail et simplifier vos procédures de dépistage.

ACCESSOIRES (inclus avec votre dispositif)

- 1 sac de transport
- 1 sachet d'appuis frontaux biocompatibles

AUTRES ACCESSOIRES (non inclus)

- Valise de transport
- Clip VESA



2
ANS
GARANTIE
ACCESS