

THIẾT BỊ TẦM SOÁT THỊ GIÁC



NHẬP VÀO MỘT KÍCH THƯỚC KHÁC **VISIOLITE® 4K**

TẦM SOÁT RỐI LOẠN THỊ GIÁC

- Đơn giản, nhanh chóng và đầy đủ
- hoàn toàn có thể cá nhân hoá và tự động hoá
- Kiểm tra chất lượng 4K
- Kiểm tra thị lực ngẫu nhiên



CÔNG NGHỆ TIỀN TIẾN ĐỂ PHỤC VỤ BẠN TỐT HƠN

Visiolite® 4K là một thiết bị dành cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc và chuyên gia y tế dự phòng. Đó là sự tập trung của các công nghệ đã được cấp bằng sáng chế kết hợp giữa quang học, điện tử và tin học, giúp đo lường thị lực và phát hiện các rối loạn thị lực chính.



- 1 **Màn hình 4K LCD 5 điểm** sắc nét và chất lượng hình ảnh chưa từng có, đồng thời đem đến sự linh hoạt và cá nhân hoá cho mỗi lần kiểm tra (độ sáng, khoảng cách, bảng thị lực...).
- 2 **Phù hợp với người đeo thấu kính lữ tiến**
Người được thử nghiệm chuyển từ tầm nhìn xa sang tầm nhìn gần chỉ bằng cách hạ thấp tầm mắt của họ.
- 3 **Cảm biến nhạy & chỗ tựa phía trước tiện dụng** đảm bảo vị trí khuôn mặt tối ưu.
- 4 **Phân tích trường thị giác đầy đủ,**
Một hệ thống cơ giới đã được cấp bằng sáng chế giúp kiểm tra các trường ngang, dọc, mũi và trung tâm (64 đèn leds dưới 30 độ).
- 5 **Công tắc On/Off (bật/tắt)**
Thiết bị có thể tắt mà không cần rút phích cắm.
- 6 **Chân linh hoạt chống trượt** đảm bảo sự ổn định của thiết bị.

NHIỀU TÍNH NĂNG với VisioWin®

Phần mềm **Visiolite® 4K** trực quan, cho phép bạn xử lý nhanh chóng và hiệu quả bài kiểm tra trong vài phút.

- Tạo trình tự kiểm tra theo các hạng mục công việc.
- Áp dụng việc tinh chỉnh để dễ dàng đọc các kết quả.
- Tùy chỉnh các hướng dẫn cho người vận hành và bệnh nhân.
- Gửi thông tin kĩ thuật bằng 1 clic của kỹ thuật viên khi bạn cần hỗ trợ.
- Hỗ trợ giải thích kết quả và tạo trình tự.



mới


VisioWin® LES +

- Chức năng so sánh các kết quả.
- Dễ dàng thiết lập file thông tin bằng cách nhập, xuất dữ liệu cài đặt chỉ bằng 1 clic.
- GATEAWAY: đơn giản hoá việc truyền tải kết quả với gói phần mềm kinh doanh.
- Cho bệnh nhân xem được tổng thể bài kiểm tra trong khi đang kiểm tra.
- Kiểm tra thị lực ngẫu nhiên để tránh ghi nhớ.

CÁC GÓI KIỂM TRA

HOÀN TOÀN CÁ NHÂN HOÁ VÀ CẢI TIẾN

Vũ trụ **Visiolite® 4K** cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn kiểm tra để không bỏ lỡ một bệnh lý quan trọng. Nghề nghiệp của bạn đang thay đổi, và chúng tôi cũng vậy.

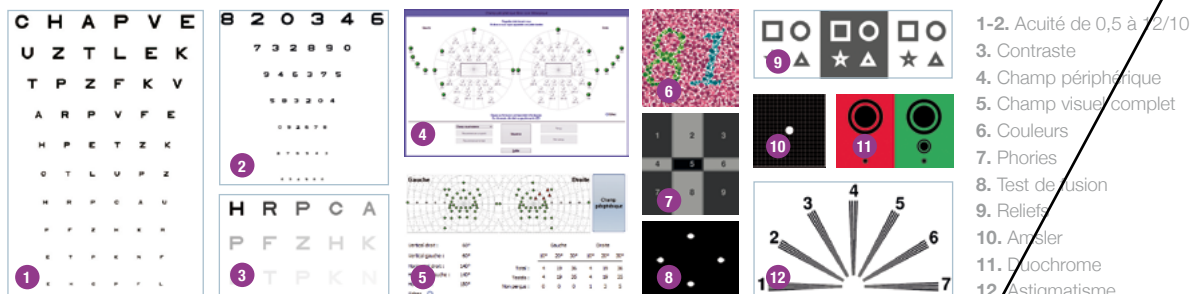

SƠ SÁNH CÁC MODEL VÀ CHỌN MODEL CỦA RIÊNG BẠN

CÁC GÓI KIỂM TRA	Europe Edition	Europe Premium	US Edition	US Premium	DE Edition	DE Premium	UK Edition	UK Premium
Bảng thị lực - ABC	•	•	•	•		•	•	•
Bảng thị lực - 123	•	•		•	•	•		•
Bảng thị lực - E Raskin					•	•	•	•
Bảng thị lực - Landolt (4 vị trí)	•	•	•	•			•	•
Bảng thị lực - Landolt (8 vị trí)					•	•		
LƯỚI Amsler	•	•	•	•	•	•	•	•
Loạn thị	•	•	•	•	•	•	•	•
Thị lực kém - ABC (một mắt)	•	•	•	•			•	•
Thị lực kém - Landolt (8 điểm) (một mắt)					•	•		
Trường thị giác toàn diện.	•	•	•	•	•	•	•	•
Hai màu đỏ/xanh lá cây	•	•			•	•	•	•
Hợp nhất	•	•	•	•	•	•	•	•
Tật viễn thị abc +1 đi-ốp	•	•	•	•			•	•
Hypermétropie E + 1đ					•	•		
Tật viễn thị Landolt (4 điểm) + 1đ							•	•
Thị giác thích nghi sáng tối	•	•	•	•	•	•	•	•
Thị giác thích nghi sáng tối Landolt (8 điểm)					•	•		
Độ lác	•	•	•	•	•	•	•	•
Nhận dạng màu sắc tiêu chuẩn	•	•	•	•	•	•	•	•
Nổi bật	•	•	•	•	•	•	•	•
Chống chói*		•		•		•		•
Nhạy với chói lóa*		•		•		•		•
Nhạy cảm với sự tương phản - ABC	•	•	•	•			•	•
Nhạy cảm với sự tương phản - Landolt (8 điểm)					•	•		

Nhiều khoảng cách có sẵn theo chức năng của các mô hình lựa chọn. *Gói và test toàn diện.*

Đối với giải pháp cá nhân hoá, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

*Kiểm tra độ nhạy cảm, khả năng chống chói và tầm nhìn trung tâm không có trên điều khiển

CÁC MẪU KHÁC: Chúng tôi cũng đưa ra các gói test dành riêng cho việc sàng lọc trực quan trẻ em cũng như là để thi lấy giấy phép lái xe. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

ĐIỀU DẪN THIẾT BỊ CỦA BẠN ĐƠN GIẢN

Bạn di chuyển ? Bạn không có máy tính?

Hãy sử dụng **điều khiển từ xa LCD** với **màn hình cảm ứng rộng** để chỉ bằng một click để bắt đầu bài kiểm tra hoặc một loạt bài kiểm tra. Các bài kiểm tra trường thị giác trung tâm, độ nhạy và khả năng chống lóa chỉ khả dụng trên các phiên bản vi tính hóa.

Thiếu thời gian?

Hãy sử dụng **VisioClick®** để tự động hoá bài test, **hướng dẫn bằng giọng nói** trong phần ngôn ngữ theo lựa chọn của bạn (tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hà Lan, tiếng Ý, tiếng Ba Lan, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ, tiếng Ả Rập...) ở **phần hiển thị của hệ điều hành tùy chọn**

PHỤ KIỆN (đi kèm với thiết bị của bạn)

Lăng kính phụ dùng một lần (1 hộp được cung cấp cho mỗi thiết bị được mua)

CÁC PHỤ KIỆN KHÁC (không bao gồm)

- Hộp đựng
- Lốp bảo vệ



NHÀ PHÂN PHỐI CỦA BẠN

2
NĂM
BẢO HÀNH
VISIOLITE



51 rue Antoine Primat
69100 Villeurbanne

Tel +33 (0)4 72 34 89 89
Fax +33 (0)4 72 33 43 51
contact@fim-medical.com

