

เครื่องตรวจสายตา



สัมผัสมิติใหม่แห่ง การมองเห็น **VISIOLITE® 4K**

การตรวจจับความผิดปกติของสายตา

- ง่าย รวดเร็ว และครบถ้วน
- ปรับค่าได้ตามต้องการ และอัตโนมัติ
- มีการทดสอบคุณภาพระดับ 4K
- การทดสอบความคมชัดของสายตาแบบสุ่ม



CE



เทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อคุณ

Visiolite® 4K เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน. **Visiolite® 4K** รวบรวมเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรแล้ว ผสานรวมระหว่างการใช้แสง อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ ช่วยให้สามารถวัดความเข้มข้นของสายตาและตรวจพบความผิดปกติหลักๆ ของสายตาได้.

- 1 ด้วยหน้าจอ 4K LCD ขนาด 5 นิ้ว ที่มอบความคมชัดและคุณภาพของผลลัพธ์ พร้อมกับความยืดหยุ่นและการปรับแต่งการทดสอบต่างๆ (ความสว่าง ระยะทาง อักษรทดสอบ...).
- 2 เหมาะสำหรับผู้ที่ใส่เลนส์โปรเกรสซีฟ ผู้รับการทดสอบ สามารถเปลี่ยนจากการมองไกลไปยังการมองใกล้ได้ง่ายๆ เพียงแค่ก้มมองลง.
- 3 เครื่องตรวจจับที่มีความไว และรองรับหน้าผากตามหลัก สรีรศาสตร์ ช่วยให้อัดตำแหน่งใบหน้าได้อย่างเหมาะสม.
- 4 การวิเคราะห์ สายตา ด้วยระบบมอเตอร์ที่ได้รับสิทธิบัตร สามารถทดสอบระยะการมองเห็นในแนวนอน แนวตั้ง แนวขนาบจมูก และแนวกลาง (64 ไฟ LED ที่มีมุมน้อยกว่า 30°).
- 5 สวิตช์ เปิด/ปิด อุปกรณ์สามารถถูกปิดได้โดยไม่ต้องถอดปลั๊ก.
- 6 ประกอบด้วยขาที่ยกขึ้นเพื่อป้องกันการสั่นไหวและความเสถียร

ตัวเลือกมากมายกับ VisioWin®

VisioWin® เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวก ช่วยให้เริ่มต้นการใช้งานอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อตรวจสอบสายตาในเวลาไม่กี่นาที.

- สร้างลำดับการทดสอบที่กำหนดเองตามหมวดหมู่ของอาชีพ.
- ใช้คะแนนเพื่อความสะดวกในการแปลผลลัพธ์.
- ปรับแต่งคำแนะนำให้กับผู้ทดสอบ และผู้เข้ารับการทดสอบ.
- เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ สามารถส่งข้อมูลในคลิกเดียวถึงช่างของเรา.
- คู่มือช่วยในการแปลผลลัพธ์ และการสร้างลำดับ.


รูปแบบใหม่

VisioWin® ข้อดีของ

- ฟังก์ชันเปรียบเทียบผลตรวจ.
- ทำให้การกำหนดค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณง่ายขึ้นโดยการนำเข้าและส่งออกการตั้งค่าของคุณด้วยคลิกเดียว.
- เกณฑ์เฉลี่ย : การบรรจุอุปกรณ์การส่งผลสอบทดสอบได้อย่างง่ายดายด้วยซอฟต์แวร์สำเนา.
- การแสดงผลโดยตรง ให้ผู้ป่วยเห็นระหว่างการตรวจ.
- การทดสอบความชัดเห็นแบบสุ่มเพื่อป้องกันการจำคำตอบ.

ชุดการทดสอบ กำหนดค่าได้เอง และสามารถพัฒนาได้

Visiolite® 4K มีแบบทดสอบให้คุณได้เลือกทดสอบอย่างหลากหลาย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดโรคที่สำคัญ อาชีพของคุณมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เราจึงเช่นกัน.

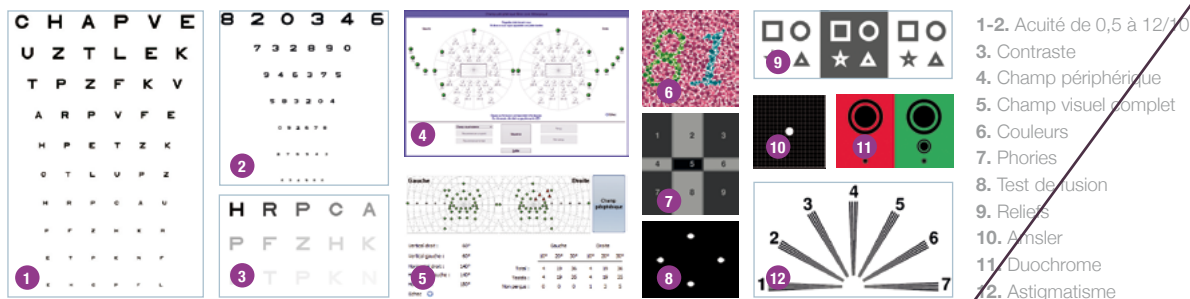

เปรียบเทียบรุ่น และเลือกรุ่นที่เหมาะสมคุณ

ชุดการทดสอบ	Europe Edition	Europe Premium	US Edition	US Premium	DE Edition	DE Premium	UK Edition	UK Premium
ความชัดเจน - ABC	•	•	•	•		•	•	•
ความชัดเจน - 123	•	•		•	•	•		•
ความชัดเจน - E จาก Raskin					•	•	•	•
ความชัดเจน - Landolt (4 ตำแหน่ง)	•	•	•	•			•	•
ความชัดเจน - Landolt (8 ตำแหน่ง)					•	•		
แผ่นทดสอบแอมสเลอร์ (AMSLER GRID)	•	•	•	•	•	•	•	•
สายตาเอียง	•	•	•	•	•	•	•	•
การมองเห็นระดับต่ำ - ABC (โมโนคูล่า)	•	•	•	•			•	•
การมองเห็นระดับต่ำ - Landolt (8 ตำแหน่ง) (โมโนคูล่า)					•	•		
สนามการมองเห็นทั่วไป	•	•	•	•	•	•	•	•
คูโอโครม แดง/เขียว	•	•			•	•	•	•
ภาพรวม	•	•	•	•	•	•	•	•
โครงสร้างที่มีการสูงขึ้น ABC + 10	•	•	•	•			•	•
โครงสร้างที่มีการสูงขึ้น E + 10					•	•		
โครงสร้างโคมมอนด์สัญลักษณ์ Landolt (4 ตำแหน่ง) + 10							•	•
การมองเห็นพลบค่ำ	•	•	•	•	•	•	•	•
การมองเห็นพลบค่ำ Landolt (8 ตำแหน่ง)					•	•		
ตาเหล่	•	•	•	•	•	•	•	•
การรับรู้สีมาตรฐาน	•	•	•	•	•	•	•	•
การมองภาพสามมิติ	•	•	•	•	•	•	•	•
ความต้านทานต่อแสงจ้า*		•		•		•		•
ความไวต่อแสงจ้า*		•		•		•		•
ความไวต่อความแตกต่างของสี - ABC	•	•	•	•			•	•
ความไวต่อความคมชัดต่าง ๆ - Landolt (8 ตำแหน่ง)					•	•		

มีระยะทางที่ต่างกัน โดยสามารถเลือกได้ตามรุ่น หมายเหตุ ชุดและการทดสอบไม่ครอบคลุมทั้งหมด.

สำหรับการใช้งานที่จำเพาะเจาะจง โปรดติดต่อเรา

* หมายเหตุ การทดสอบความไวของการรับรู้ ความต้านทานต่อแสงสะท้อน และสนามการมองเห็นที่กลางไม่สามารถใช้งานได้ด้วยวิธีโมทคอนโทล

นอกเหนือจากนี้: เรายังมีชุดการทดสอบที่เฉพาะ สำหรับเด็ก และการขบิ่ โปรดติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ควบคุมเครื่องมือ อย่างง่ายดาย

หากคุณกำลังเดินทาง และไม่มี คอมพิวเตอร์

คุณสามารถ ใช้รีโมทคอนโทรล LCD พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ เพื่อเริ่มทดสอบหรือลำดับการทดสอบด้วยคลิกเดียว. ทั้งนี้ การทดสอบสนามวิสัยทางกลาง, ความไวต่อความสว่างและความต้านทานต่อแสงสะท้อน มีให้เฉพาะบนเวอร์ชันคอมพิวเตอร์เท่านั้น

หากคุณ ไม่มี เวลา

ใช้ VisioClick® เพื่อทำการทดสอบอัตโนมัติด้วยคำแนะนำด้วยเสียงในภาษาต่างๆ (ฝรั่งเศส, อังกฤษ, เยอรมัน, สเปน, ดัตช์, อิตาลี, โปแลนด์, โปรตุเกส, ตุรกี, อาหรับ...) จำเป็นต้องมีการเฝ้าดูของผู้ทำการทดสอบ

อุปกรณ์เสริม (รวมอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ)
แผ่นรองหน้าแบบใช้แล้วทิ้ง
(1 กล่องฟรี ต่อ 1 อุปกรณ์)

อุปกรณ์เสริมอื่นๆ (ไม่รวม)

- กระเป๋าสำหรับพกพา
- ฝาครอบ



ตัวแทนจำหน่าย

2
ปี

รับประกัน
VISIOLITE



51 rue Antoine Primat
69100 Villeurbanne

Tel +33 (0)4 72 34 89 89
Fax +33 (0)4 72 33 43 51
contact@fim-medical.com

