

VIZUÁLNÍ PROMÍTAČ



ZADÁNO V JINÝ ROZMĚR **VISIOLITE® 4K**

SCREENING PORUCH ZRAKU

- Jednoduché, rychlé a kompletní
- Plně přizpůsobitelné a automatizovatelné
- Testy kvality 4K
- Náhodné testy zrakové ostrosti



POKROČILÁ TECHNOLOGIE ABY VÁM LÉPE SLOUŽILA

Visiolite® 4K je zařízení určené pro profesionály pracovně lékařských služeb a preventivní medicíny. Jedná se o sestavu patentovaných technologií kombinující optiku, elektroniku a výpočetní techniku, umožňujících **měření zrakové ostrosti a detekci hlavních poruch zraku.**



- 1 **5palcový 4K LCD displej** poskytuje bezkonkurenční ostrost a kvalitu obrazu a zároveň nabízí velkou flexibilitu a přizpůsobení testů (jas, vzdálenost, optotypy atd.).
- 2 **Vhodné pro uživatele progresivních čoček**
Pacient přechází z vidění na dálku na vidění do blízka jednoduše tím, že sklopí zrak.
- 3 **Citlivý detektor a odnímatelná opěrka čela** zajišťují optimální umístění obličeje.
- 4 **Analýza kompletního zorného pole**
Patentovaný motorizovaný systém umožňuje testování horizontálního, vertikálního, nosního a centrálního pole (64 LED pod úhlem 30°).
- 5 **Vypínač**
Zařízení lze vypnout, aniž byste jej museli odpojit.
- 6 **Zatížená protiskluzová patka** pro zajištění stability zařízení



MNOHO MOŽNOSTÍ s VisioWin®

VisioWin®, intuitivní software, vám umožní začít rychle a efektivně a provést vaše zkoušky během několika minut.

- Vytvářejte personalizované testovací sekvence podle kategorie povolání.
- Použijte bodování, aby byly výsledky snáze čitelné.
- Přizpůsobte si pokyny pro obsluhu a pacienta.
- Odešlete technické informace na 1 kliknutí našemu technikovi, když potřebujete pomoc.
- Podpora pro interpretaci výsledků a vytváření sekvencí.

Novinka


VisioWin® LES +

- Funkce porovnání zkoušek.
- Uspadňuje konfiguraci vašich počítačových pracovních stanic importem a exportem nastavení 1 kliknutím.
- BRÁNA: zjednodušení přenosu výsledků pomocí podnikových softwarových balíčků.
- Vizualizace testů, které vidí pacient během vyšetření.
- Náhodné testy zrakové ostrosti, aby se zabránilo zapamatovatelnosti.

TESTOVACÍ BALÍČKY

PLNĚ PŘÍZPŮSOBITELNÉ A ŠKÁLOVATELNÉ

Prostředí **Visiolite® 4K** vám nabízí široký výběr testů, abyste nezmeškali důležitou patologii. Vaše profese se vyvíjí a my také.

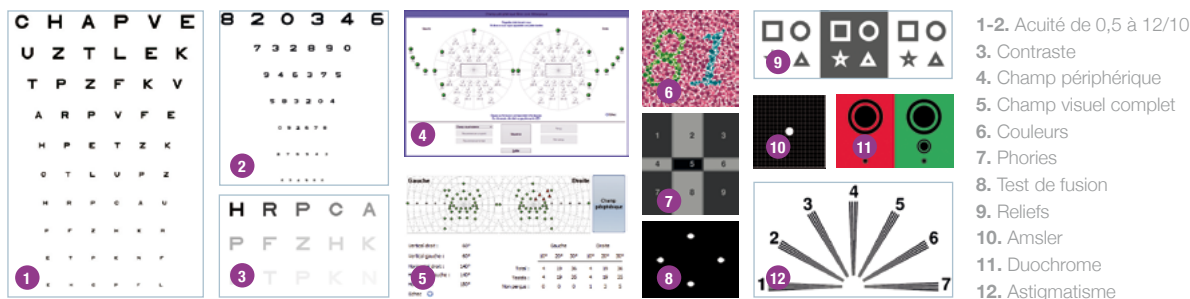

POROVNEJTE MODELÝ A VYBERTE SI SVÉ

TESTOVACÍ BALÍČKY	Europe Edition	Europe Premium	US Edition	US Premium	DE Edition	DE Premium	UK Edition	UK Premium
Ostrost – ABC	•	•	•	•		•	•	•
Ostrost – 123	•	•		•	•	•		•
Ostrost – Raskinova stupnice					•	•	•	•
Ostrost – Landolt (4 pozice)	•	•	•	•			•	•
Ostrost – Landolt (8 pozice)					•	•		
Amsler	•	•	•	•	•	•	•	•
Astigmatismus	•	•	•	•	•	•	•	•
Slabé vidění – ABC (monokulární)	•	•	•	•			•	•
Slabé vidění – Landolt (8 pozic) (monokulární)					•	•		
Plné zorné pole	•	•	•	•	•	•	•	•
Červený/zelený duochrom	•	•			•	•	•	•
Fúze	•	•	•	•	•	•	•	•
Dalekozrakost ABC + 10	•	•	•	•			•	•
Dalekozrakost E + 10					•	•		
Landoltova dalekozrakost (4 polohy) + 10							•	•
Mezopické vidění	•	•	•	•	•	•	•	•
Mezopické vidění Landolt (8 pozic)					•	•		
Fórie	•	•	•	•	•	•	•	•
Standardní vnímání barev	•	•	•	•	•	•	•	•
Ohraničení	•	•	•	•	•	•	•	•
Odolnost proti oslnění*		•		•		•		•
Citlivost na oslnění*		•		•		•		•
Citlivost na kontrasty – ABC	•	•	•	•			•	•
Citlivost na kontrasty – Landolt (8 poloh)					•	•		

V závislosti na zvoleném modelu je k dispozici několik vzdáleností. *Nevyžerpávané balíčky a testy.*

Pro individuální řešení nás prosím kontaktujte.

*Test citlivosti, odolnosti proti oslnění a centrálního zorného pole nejsou u dálkového ovladače k dispozici.

NAŠE DALŠÍ MODELÝ: Nabízíme také testovací balíčky určené pro zrakovou kontrolu dětí a také pro řidiče a kontrolu řidičského oprávnění. Pro více informací nás prosím kontaktujte.

OVLÁDÁNÍ VAŠEHO ZAŘÍZENÍ S LEHKOSTÍ

Stěhujete se? Nemáte počítač?

Pomocí **dálkového ovladače LCD** s **velkým dotykovým displejem** spustíte test nebo testovací sekvenci jediným kliknutím. Testy centrálního zorného pole, citlivosti a odolnosti proti oslnění jsou dostupné pouze u počítačových verzí.

Nedostatek času?

Použijte **VisioClick®** k automatizaci testů, **hlasové pokyny** v jazyce dle vašeho výběru (francouzština, angličtina, němčina, španělština, holandština, italština, polština, portugalština, turečtina, arabština...) činí **přítomnost operátora volitelnou**.



PŘÍSLUŠENSTVÍ (součástí vašeho zařízení)

Obličejové štíty na jedno použití
(1 krabice nabízena na zakoupené zařízení)

AUTRES ACCESSOIRES (součástí vašeho zařízení)

- Přepavní pouzdro
- Ochranný kryt



VÁŠ DISTRIBUTOR

2
ROKY
ZÁRUKA
VISIOLITE



51 rue Antoine Primat
69100 Villeurbanne

Tel +33 (0)4 72 34 89 89
Fax +33 (0)4 72 33 43 51
contact@fim-medical.com

