

PRÍSTROJ NA SKRÍNINGOVÉ
VYŠETRENIE ZRAKU



VSTÚPTE DO INEJ DIMENZIE **VISIOLITE® 4K**

SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIE PORÚCH ZRAKU

- Jednoduché, rýchle a komplexné
- Plne prispôsobiteľné a automatizovateľné
- Testy v kvalite 4K
- Náhodné zoradovanie testov zrakovej ostrosti



ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIA PRE EŠTE LEPŠIE SLUŽBY

Visiolite® 4K je prístroj určený pre oddelenia pracovného lekárstva a odborníkov v oblasti preventívnej medicíny. Zahŕňa množstvo patentovaných technológií sústredených na jednom mieste, ktoré kombinujú optiku, elektroniku a počítačové technológie a umožňujú **meranie zrakovéj ostrosti** a **skrining hlavných porúch videnia**.



- 1 **LCD displej s uhlopriečkou 5 palcov a rozlíšením 4K** ponúka bezkonkurenčnú ostrosť a kvalitu obrazu a zároveň veľkú flexibilitu a možnosť individuálneho prispôsobenia testov (jas, vzdialenosť, optotypy atď.).
- 2 **Vhodný pre používateľov multifokálnych okuliarov**
Pacient pri vyšetrení prechádza z videnia do diaľky na videnie do blízka jednoduchým sklopením pohľadu.
- 3 **Citlivý detektor a odnímateľná opierka čela** zabezpečujú optimálnu polohu tváre.
- 4 **Kompletná analýza zorného poľa**
Patentovaný motorizovaný systém umožňuje testovanie horizontálneho, vertikálneho, nosového a centrálného poľa (64 LED diód s uhlom menším ako 30°).
- 5 **Vypínač ZAP/VYP.**
Prístroj je možné vypnúť bez toho, aby ste ho museli odpojiť z elektrickej zásuvky.
- 6 **Podstavec so záťažou a protišmykovou úpravou** zabezpečuje stabilitu prístroja.

NESPOČETNÉ MOŽNOSTI vďaka VisioWin®

Intuitívny softvér **VisioWin®** umožňuje obsluhu rýchlo a efektívne začať pracovať s prístrojom, takže vyšetrenie zraku trvá iba niekoľko minút.

- Možnosť vytvárania prispôbených sekvencií testov podľa rôznych kategórií povolaní.
- Systém bodovania pre jednoduchšiu interpretáciu výsledkov.
- Možnosť prispôsobenia pokynov pre obsluhu prístroja a pacienta.
- Technická podpora: možnosť odoslania technických informácií nášmu technikovi jedným kliknutím.
- Podpora pri interpretácii výsledkov a pri vytváraní sekvencií vyšetrenia.



Novinka


VisioWin® POZITÍVA SOFTVÉRU

- Funkcia porovnávania vyšetrení.
- Uľahčuje konfiguráciu počítačových pracovných staníc vďaka funkcii importu a exportu nastavení len jedným kliknutím.
- GATEWAY: zjednodušenie prenosu výsledkov pomocou rôznych typov firmvéru.
- Vizualizácia testov, ktoré pacient vidí počas vyšetrenia.
- Náhodné zoradovanie testov zrakovéj ostrosti eliminuje možnosť zapamätania si testov zo strany pacienta..

BALÍKY TESTOV

PLNE PRISPÔSOBITEL'NÉ A INOVOVATEL'NÉ

Svet **Visiolite® 4K** vám ponúka široký výber testov, takže vám neunikne žiadna dôležitá porucha zraku. Vaše povolanie neustále napreduje a my s ním.

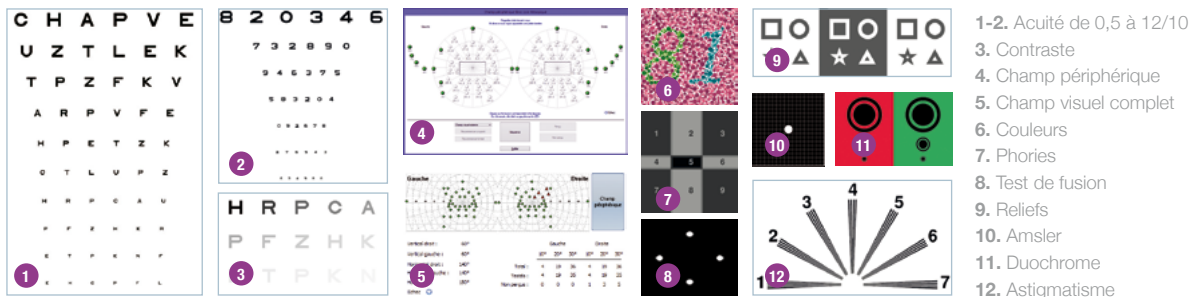

POROVNAJTE MODELÝ A VYBERTE SI TEN NAJMHODNEJŠÍ PRE VÁS

BALÍKY TESTOV	Europe Edition	Europe Premium	US Edition	US Premium	DE Edition	DE Premium	UK Edition	UK Premium
Zraková ostrosť – ABC	•	•	•	•		•	•	•
Zraková ostrosť – 123	•	•		•	•	•		•
Zraková ostrosť – Raskinove E					•	•	•	•
Zraková ostrosť – Landoltove kruhy (4 polohy)	•	•	•	•			•	•
Zraková ostrosť – Landoltove kruhy (8 polohy)					•	•		
Amslerova mriežka	•	•	•	•	•	•	•	•
Astigmatizmus	•	•	•	•	•	•	•	•
Slabé videnie – ABC (monokulárne)	•	•	•	•			•	•
Slabé videnie – Landoltove kruhy (8 polôh) (monokulárne)					•	•		
Kompletná analýza zorného poľa	•	•	•	•	•	•	•	•
Bichromatický test červená/zelená	•	•			•	•	•	•
Splynutie	•	•	•	•	•	•	•	•
Ďalekozrakosť ABC + 10	•	•	•	•			•	•
Ďalekozrakosť E + 10					•	•		
Ďalekozrakosť s Landoltovými kruhmi (4 polohy) + 10							•	•
Mezopické videnie	•	•	•	•	•	•	•	•
Mezopické videnie – Landoltove kruhy (8 polôh)					•	•		
Škúlenie	•	•	•	•	•	•	•	•
Štandardné videnie farieb	•	•	•	•	•	•	•	•
Plasticosť	•	•	•	•	•	•	•	•
Odolnosť voči oslneniu*		•		•		•		•
Citlivosť na oslnenie*		•		•		•		•
Citlivosť na kontrasty – ABC	•	•	•	•			•	•
Citlivosť na kontrasty – Landoltove kruhy (8 polôh)					•	•		

V závislosti od zvoleného modelu je k dispozícii niekoľko vzdialeností. Zoznamy balíkov a testov nie sú úplné.

Ak máte záujem o riešenie na mieru, kontaktujte nás.

*Testy citlivosti, odolnosti voči oslneniu a centrálneho zorného poľa nie sú k dispozícii v kombinácii s diaľkovým ovládaním.

NAŠE ĎALŠIE MODELÝ: Ponúkame aj balíky testov na skríningové vyšetrenie zraku u detí a vyšetrenie zraku na vodičský preukaz. Ak máte záujem o podrobnejšie informácie, kontaktujte nás.

OVLÁDANIE PRÍSTROJA

JE ÚPLNE JEDNODUCHÉ

**Presúvate sa z miesta na miesto?
Nemáte k dispozícii počítač?**

Dial'kový ovládač s veľkým dotykovým LCD displejom umožňuje spustiť test alebo sekvenciu testov jedným kliknutím. Testy centrálného zorného poľa, citlivosti a odolnosti voči oslneniu sú k dispozícii len v počítačových verziách.

Máte málo času?

Použite riešenie **VisioClick®**, ktoré umožňuje automatizované vykonávanie testov pri vyšetrení zraku. K dispozícii sú **hlasové pokyny** v jazyku podľa vášho výberu (francúzština, angličtina, nemčina, španielčina, holandčina, taliančina, poľština, portugalčina, turečtina, arabčina atď.), takže **vyšetrenie si nevyžaduje prítomnosť obsluhy**.



PRÍSLUŠENSTVO

(dodáva sa spolu s prístrojom)

Jednorazové ochranné návlčky na tvár
(1 balenie zadarmo ku každému zakúpenému prístroju)

ALŠIE PRÍSLUŠENSTVO (nedodáva sa spolu s prístrojom)

- Taška na prenášanie prístroja
- Ochranný obal

VÁŠ DISTRIBÚTOR

2
ROČNÁ
ZÁRUKA
VISIOLITE



51 rue Antoine Primat
69100 Villeurbanne

Tel +33 (0)4 72 34 89 89
Fax +33 (0)4 72 33 43 51
contact@fim-medical.com

