

REGOS DIAGNOSTIKOS PRIETAISAS



PATEKITE
Į KITĄ
DIMENSIJĄ
VISIOLITE® 4K

**REGOS SUTRIKIMŲ
APTIKIMAS**

- Paprastas, greitas ir išsamus
- Visiškai personalizuotas ir automatizuotas
- 4K kokybės testai
- Atsitiktiniai regos aštrumo tyrimai



PAŽANGIAUSIA TECHNOLOGIJA KAD GALĖTUME GERIAU JUMS TARNAUTI

Visiolite® 4K yra prietaisas, skirtas sveikatos darbe priežiūros tarnyboms ir prevencinės medicinos specialistams. Tai patentuotų optikos, elektronikos ir informatikos technologijų rinkinys, **įgalinantis išmatuoti regos aštrumą** ir **nustatyti pagrindinius regos sutrikimus**.



- 1 **5 colių 4K skystųjų kristalų ekranas** užtikrina neprilygstamą vaizdo švarumą ir kokybiškumą kartu su tyrimų lankstumo ir individualizavimo (šviesumo, atstumo, optotipo ir t. t.) galimybėmis.
- 2 **Tinka progresinių akinių naudotojams**
Pacientas pereina nuo žiūrėjimo į tolį prie žiūrėjimo iš arti paprasčiausiai nuleisdamas žvilgsnį.
- 3 **Jutiminis jutiklis ir atskiriama kaktos atrama** užtikrina optimalią veido padėtį.
- 4 **Viso regos lauko analizė**
Patentuota motorizuota sistema padeda išmatuoti regos lauką horizontaliai, vertikaliai, per nosies ir centrinę ašį (64 šviesos diodai iki 30°).
- 5 **Jungiklis**
Prietaisą galima išjungti iš įtampos šaltinio jo neišjungiant.
- 6 **Neslystanti balansinė kojėlė** padeda užtikrinti prietaiso stabilumą.



ĮVAIRIOS GALIMYBĖS kurias siūlo VisioWin®

VisioWin® – tai intuityvioji kompiuterinė programa, padedanti veiksmingai atlikti tyrimus per vos kelias minutes.

- Sukurti suasmenintas tyrimų sekas pagal profesinę kategoriją.
- Taikyti balų skaičiavimą siekiant palengvinti rezultatų skaitymą.
- Suasmeninti operatoriui ir pacientui teikiamus nurodymus.
- Vienu spustelėjimu nusiųsti techninę informaciją mūsų technikui, jei jums reikia pagalbos.
- Pagalba aiškinant rezultatus ir kuriant sekas.

Naujiena


VisioWin® LES +

- Tyrimų palyginimo funkcija.
- Palengvina jūsų informacijos įrašymą, nes parametrai importuojami ir eksportuojami vienu paspaudimu.
- GATEWAY : rezultatų perdavimo supaprastinimas naudojant profesinės programinės įrangos paketus.
- Tyrimo metu paciento matomų tyrimų vizualizavimas.
- Atsistatytiniai regos aštrumo tyrimai siekiant išvengti įrašymo į atmintį.

TYRIMŲ PAKETAI

VISIŠKAI SUASMENINAMI IR KEIČIAMI

Visiolite® 4K jums siūlo platų tyrimų pasirinkimą, padėsiantį aptikti rimtas ligas.
Jūsų profesija keičiasi, tobulėjame ir mes.

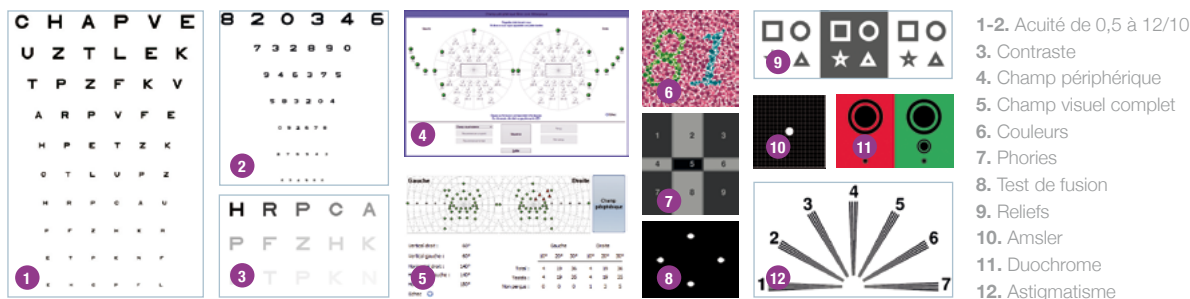

PALYGINKITE MODELIUS IR IŠSIRINKITE TINKAMĄ SAU

TYRIMŲ PAKETAI	Europe Edition	Europe Premium	US Edition	US Premium	DE Edition	DE Premium	UK Edition	UK Premium
Regos aštrumas: ABC	•	•	•	•		•	•	•
Regos aštrumas – 123	•	•		•	•	•		•
Regos aštrumas: Raskino skalė					•	•	•	•
Regos aštrumas: Landoito skalė (4 pozicijos)	•	•	•	•			•	•
Regos aštrumas: Landoito skalė (8 pozicijos)					•	•		
Amslerio tinklėlis	•	•	•	•	•	•	•	•
Astigmatizmas	•	•	•	•	•	•	•	•
Silpna rega: ABC (vienai akiui)	•	•	•	•			•	•
Silpna rega: Landoito skalė (8 pozicijų) (vienai akiui)					•	•		
Visas regėjimo laukas	•	•	•	•	•	•	•	•
Dvispalvis tyrimas (raudona ir žalia spalvos)	•	•			•	•	•	•
Susiliejimas	•	•	•	•	•	•	•	•
Toliaregystė: ABC + 10	•	•	•	•			•	•
Toliaregystė: E + 10					•	•		
Toliaregystė: Landoito skalė (4 pozicijų) + 10							•	•
Vištakumas	•	•	•	•	•	•	•	•
Vištakumas: Landoito skalė (8 pozicijų)					•	•		
Forija (slaptas žvaizdumas)	•	•	•	•	•	•	•	•
Standartinis spalvų suvokimas	•	•	•	•	•	•	•	•
Reljefas	•	•	•	•	•	•	•	•
Atsparumas akinimui*		•		•		•		•
Jautrumas akinimui*		•		•		•		•
Jautrumas kontrastams: ABC	•	•	•	•			•	•
Jautrumas kontrastams: Landoito skalė (8 pozicijų)					•	•		

Galimi įvairūs atstumai, jie priklauso nuo pasirinkto modelio. *Paketų ir tyrimų skaičius nėra baigtinis.*

Jei norite individualaus sprendimo, kviečiame susisiekti su mumis.

* Kartu su nuotolinio valdymo pultu netiekiami jautrumo, atsparumo akinimui ir centrinio regėjimo lauko tyrimai.

KITI MŪSŲ MODELIAI: taip pat siūlome tyrimų paketus vaikų bei vairuotojo pažymėjimo siekiančių asmenų regai patikrinti. Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis į mus.

VALDYKITE SAVO PRIETAISĄ VISIŠKAI PAPRASTAI

Keliaujate? Neturite kompiuterio?

Naudokite **skystųjų kristalų nuotolinio valdymo pultą su plačiu jutikliniu ekranu** ir pradėkite tyrimą ar tyrimų seriją. Centrinio regos lauko, jautrumo ir atsparumo akinimui tyrimai tiekiami tik su kompiuterizuotomis versijomis.

Trūksta laiko?

Naudodami „**VisioClick®**“ automatizuokite savo tyrimus ar **balso komandas** savo pasirinkta kalba (prancūzų, anglų, vokiečių, ispanų, olandų, italų, lenkų, portugalų, turkų, arabų...) ir **operatoriaus dalyvavimas taps nebūtinas**.

PRIEDAI (pridedami prie jūsų prietaiso)

Vienkartinės kepuraitės (siūloma po vieną dėžutę vienam perkamam aparatui)

KITI PRIEDAI (neįtraukti)

- Transportavimo lagaminas
- Apsauginis gaubtas



JŪSŲ PLATINTOJAS