

UREĐAJ ZA ISPITIVANJE VIDA



UĐITE U
DRUGU
DIMENZIJU

VISIOLITE® 4K

**ISPITIVANJE
POREMEĆAJA VIDA**

- Jednostavno, brzo i potpuno
- Potpuno individualiziran i automatiziran
- Testovi kvalitete 4K
- Nasumični testovi vidne oštine



NAPREDNA TEHNOLOGIJA DA VAM BOLJE SLUŽI

Visiolite® 4K je uređaj namijenjen uslugama medicine rada i stručnjacima preventivne medicine. To je koncentrat patentiranih tehnologija koje spajaju optiku, elektroniku i računalstvo, omogućujući **mjerenje vidne oštrote i ispitivanje glavnih poremećaja vida.**



- 1 5-inčni 4K LCD zaslon** nudi nenadmašnu oštrinu i kvalitetu slike uz veliku fleksibilnost i individualiziranost testova (svjetlina, udaljenost, optotipovi, itd.).
- 2 Prikladno za nositelje progresivnih leća**
Pacijent se prebacuje s vida na daljinu na vid na blizinu jednostavnim spuštanjem pogleda.
- 3 Osjetljivi detektor i Uklonjiva potpora za čelo** osiguravaju optimalan položaj lica.
- 4 Analiza kompletnog vizualnog polja**
Patentirani motorizirani sustav omogućuje ispitivanje vodoravnog, okomitog, nazalnog i centralnog polja (64 LED diode manje od 30°)
- 5 Prekidač za uključivanje/isključivanje**
Uređaj se može isključiti bez potrebe za isključivanjem iz utičnice.
- 6 Otežana neklizajuća noga** koja jamči stabilnost uređaja



PUNO MOGUĆNOSTI s VisioWin®

VisioWin®, intuitivni softver, omogućuje da brzo i učinkovito započnete s izvođenjem ispitivanja u samo nekoliko minuta.

- Stvorite individualizirane nizove testova prema kategoriji zanimanja.
- Primijenite scoring da biste lakše čitali rezultate.
- Individualizirajte upute dane rukovatelju i pacijentu.
- Pošaljite tehničke informacije 1 klikom našem tehničaru kada vam je potrebna pomoć.
- Podrška za tumačenje rezultata i stvaranje sekvenci.

Novo

VisioWin® LES +


- Funkcija usporedbe ispitivanja.
- Olakšava konfiguriranje vaših računalnih radnih stanica uvozom i izvozom vaših postavki samo 1 klikom.
- GATEWAY: pojednostavljenje prijenosa rezultata s poslovnim softverskim paketima.
- Vizualizacija testova koje pacijent vidi tijekom ispitivanja.
- Nasumični testovi vidne oštrote kako bi se izbjeglo pamćenje.

TESTNI PAKETI

POTPUNO INDIVIDUALIZIRANI I SKALABILNI

Visiolite® 4K univerzum nudi vam širok izbor testova kako ne biste propustili važnu patologiju.

Vaša profesija se razvija, pa tako i mi..

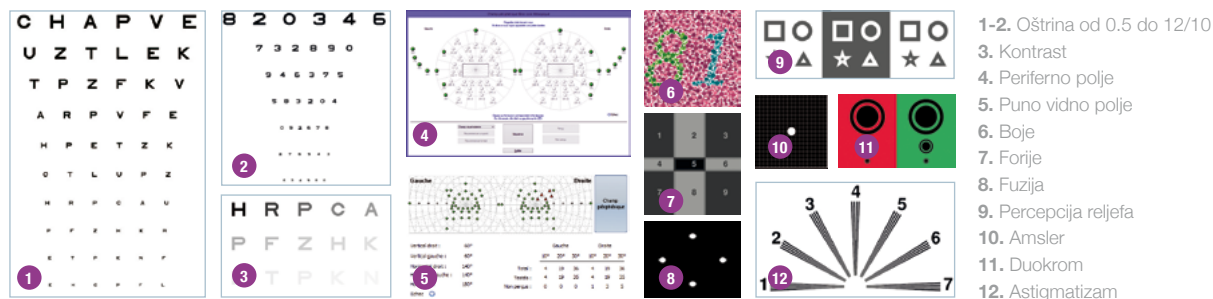

- 1-2. Oštrina od 0.5 do 12/10
3. Kontrast
4. Periferno polje
5. Puno vidno polje
6. Boje
7. Forije
8. Fuzija
9. Percepcija reljefa
10. Amsler
11. Duokrom
12. Astigmatizam

USPOREDITE MODELE ODABERITE SVOJ

TESTNI PAKET	Europe Edition	Europe Premium	US Edition	US Premium	DE Edition	DE Premium	UK Edition	UK Premium
Oštrina – ABC	•	•	•	•		•	•	•
Oštrina – 123	•	•		•	•	•		•
Oštrina – E po Raskinu					•	•	•	•
Oštrina – Landolt (4 položaja)	•	•	•	•			•	•
Oštrina – Landolt (8 položaja)					•	•		
Amsler	•	•	•	•	•	•	•	•
Astigmatizam	•	•	•	•	•	•	•	•
Slabovidnost – ABC (monokularna)	•	•	•	•			•	•
Slabovidnost – Landolt (8 položaja) (monokularna)					•	•		
Puno vidno polje	•	•	•	•	•	•	•	•
Crveno/zeleni duokrom	•	•			•	•	•	•
Fuzija	•	•	•	•	•	•	•	•
Hipermetropija ABC + 1Δ	•	•	•	•			•	•
Hipermetropija E + 1Δ					•	•		
Hipermetropija Landolt (4 položaja)+ 1Δ							•	•
Mezopski vid	•	•	•	•	•	•	•	•
Mezopski vid Landolt (8 položaja)					•	•		
Forije	•	•	•	•	•	•	•	•
Standardna percepcija boja	•	•	•	•	•	•	•	•
Percepcija reljefa	•	•	•	•	•	•	•	•
Otpornost na bljesak*		•		•		•		•
Osjetljivost na bljesak*		•		•		•		•
Kontrastna osjetljivost - ABC	•	•	•	•			•	•
Kontrastna osjetljivost - Landolt (8 položaja)					•	•		

Dostupno je nekoliko udaljenosti ovisno o odabranim modelima. Lista paketa i testova nije iscrpljena.

Za personalizirano rješenje, molimo vas da nas kontaktirate.

*Testovi osjetljivosti, otpornosti na bljesak i centralnog vizualnog polja nisu dostupni s daljinskim upravljačem.

NAŠI OSTALI MODELI: Također nudimo testne pakete namijenjene ispitivanju vida kod djece, kao i za vozačke dozvole. Za više informacija, molimo da nas kontaktirate.

UPRAVLJAJTE SVOJIM UREĐAJEM SASVIM JEDNOSTAVNO

Mijenjate mjesto? Nemate računalno?

Koristite **LCD daljinski upravljač s velikim zaslonom osjetljivim na dodir** za pokretanje testa ili niza testova samo jednim klikom. Testovi središnjeg vizualnog polja, osjetljivosti i otpornosti na bljesak dostupni su samo u računalnim verzijama.

Manjak vremena ?

Koristite **VisioClick®** za automatizaciju svojih testova, **glasovne upute** na jeziku po vašem izboru (francuski, engleski, njemački, španjolski, nizozemski, talijanski, poljski, portugalski, turski, arapski...) čine **prisutnost rukovatelja opcionalnom**.



DODATNA OPREMA (uključena uz vaš uređaj)

Štitnici za lice za jednokratnu uporabu
(1 besplatna kutija po kupljenom uređaju)

OSTALI DODATNI PRIBOR (nije uključen)

- Transportni kofer
- Zaštitna navlaka



VAŠ DISTRIBUTER