

ΟΠΤΙΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ



ΕΙΣΟΔΟΣ
ΣΕ ΑΛΛΗ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ

VISIOLITE® 4K

**ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΟΠΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**

- Εύκολα, γρήγορα και πλήρως
- Πλήρως προσαρμόσιμος και αυτοματοποιήσιμος
- Εξετάσεις σε ποιότητα 4K
- Τυχαιές εξετάσεις οπτικής οξύτητας



CE



ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ

Το **Visiolite® 4K** είναι μία μηχανή που προορίζεται προς τις υπηρεσίες υγείας και προς επαγγελματίες της προληπτικής ιατρικής. Αποτελεί ένα συμπύκνωμα τεχνολογιών κατοχυρωμένων με διπλώματα ευρεσιτεχνίας συνδυάζοντας την οπτική, τα ηλεκτρονικά και την πληροφορική, επιτρέποντας **τη μέτρηση της οπτικής οξύτητας** και **τη μέτρηση των κυρίων προβλημάτων της όρασης**.



- 1 **Οθόνη LCD 4K 5 ιντσών** που παρέχει καθαρότητα και ασυναγώνιστη ποιότητα εικόνας προσφέροντας ταυτόχρονα μεγάλη ευελιξία και εξατομίκευση των εξετάσεων (φωτεινότητα, απόσταση, οπτότυποι...).
- 2 **Προσαρμοσμένο στους προοδευτικούς χρήστες φακών**
Ο ασθενής περνάει από τη μακρινή όραση στην κοντινή όραση απλά χαμηλώνοντας το βλέμμα του.
- 3 **Ευαίσθητος ανιχνευτής & Αφαιρούμενο στήριγμα μετώπου**
διασφαλίζοντας μία βέλτιστη τοποθέτηση του προσώπου.
- 4 **Πλήρης ανάλυση του οπτικού πεδίου**
Ένα μηχανοκίνητο σύστημα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που επιτρέπει την εξέταση του οριζόντιου, κάθετου, ρινικού και κεντρικού πεδίου (64 λυχνίες LED κατώτερες από 30°).
- 5 **Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης**
Η συσκευή μπορεί να απενεργοποιηθεί χωρίς να χρειάζεται να την αποσυνδέσετε.
- 6 **Ζυγισμένο αντιολισθητικό πόδι** εγγυώντας τη σταθερότητα της συσκευής.

ΠΟΛΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ με το VisioWin®

VisioWin®, διαισθητικό λογισμικό, επιτρέπει γρήγορο και αποτελεσματικό χειρισμό για την εκτέλεση των εξετάσεων σας σε μερικά λεπτά.

- Δημιουργία αλληλουχίας εξατομικευμένων εξετάσεων σύμφωνα με τις κατηγορίες των επαγγελμάτων.
- Εφαρμογή μίας βαθμολογίας για τη διευκόλυνση της ανάγνωσης των αποτελεσμάτων.
- Εξατομίκευση των οδηγιών που δίνονται στον χειριστή και στον ασθενή.
- Αποστολή των τεχνικών πληροφοριών με 1 κλικ στον τεχνικό σας κάθε φορά που έχετε ανάγκη βοήθειας.
- Υποστήριξη και βοήθεια ως προς την ερμηνεία των αποτελεσμάτων και τη δημιουργία αλληλουχιών.




VisioWin® LES +

- Λειτουργία σύγκρισης των εξετάσεων.
- Διευκολύνει τη διαμόρφωση των σταθμών πληροφορικής εισάγοντας και εξαγόντας τις παραμέτρους σας με μόνο 1 κλικ.
- GATEWAY: απλοποίηση της μετάδοσης των αποτελεσμάτων με πακέτα λογισμικού επαγγελματικής χρήσης.
- Οπτικοποίηση των εξετάσεων για προβολή από τον ασθενή κατά τη διάρκεια της εξέτασης.
- Τυχαίες εξετάσεις οπτικής οξύτητας ώστε να αποφευχθεί η απομνημόνευση.

ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΜΑΚΟΥΜΕΝΑ

Το σύμπαν **Visiolite® 4K** σας προσφέρει μία μεγάλη επιλογή εξετάσεων ώστε να μην παραβλέψετε μία σημαντική παθολογία. Το επάγγελμά σας εξελίσσεται και εμείς το ίδιο.

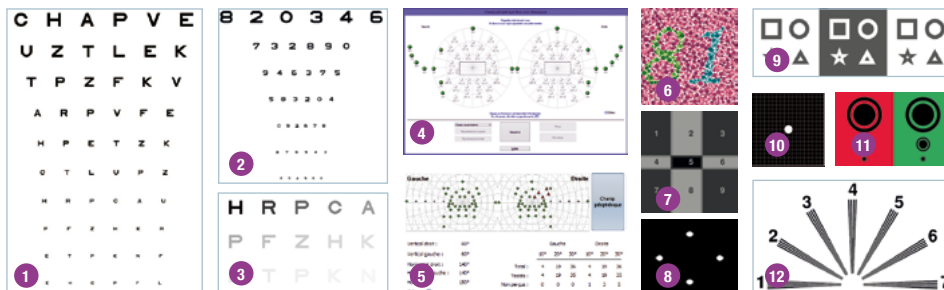

- 1-2. Οξύτητα από 0,5 έως 12/10
3. Αντίθεση
4. Περιφερικό πεδίο
5. Πλήρες οπτικό πεδίο
6. Χρώματα
7. Φώρια
8. Δοκιμή σύντηξης
9. Ανακουφίσεις
10. Amsler
11. Duochrome
12. Αστιγματισμός

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΣΑΣ

ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ	Europe Edition	Europe Premium	US Edition	US Premium	DE Edition	DE Premium	UK Edition	UK Premium
Οξύτητα- ABC	•	•	•	•		•	•	•
Οξύτητα- 123	•	•		•	•	•		•
Οξύτητα-E του Raskin					•	•	•	•
Οξύτητα-E του Landolt (4 θέσεις)	•	•	•	•			•	•
Acuité - Landolt (8 positions)					•	•		
Amsler	•	•	•	•	•	•	•	•
Αστιγματισμός	•	•	•	•	•	•	•	•
Χαμηλή όραση - ABC (μονόφθαλμη)	•	•	•	•			•	•
Χαμηλή όραση - Landolt (8 θέσεις) (μονόφθαλμη)					•	•		
Πλήρες οπτικό πεδίο	•	•	•	•	•	•	•	•
Κόκκινο/πράσινο δίχρωμο	•	•			•	•	•	•
Συγχώνευση	•	•	•	•	•	•	•	•
Υπερμετρωπία ABC + 1θ	•	•	•	•			•	•
Υπερμετρωπία E + 1θ					•	•		
Υπερμετρωπία Landolt (4 θέσεις)+ 1θ							•	•
Μεσοπικός	•	•	•	•	•	•	•	•
Μεσοπικός Landolt (8 θέσεις)					•	•		
Φωρίες	•	•	•	•	•	•	•	•
Τυπική αντίληψη χρωμάτων	•	•	•	•	•	•	•	•
Ανάγλυφα	•	•	•	•	•	•	•	•
Αντίσταση στη θάμβωση*		•		•		•		•
Ευαισθησία στη θάμβωση*		•		•		•		•
Ευαισθησία στις αντιθέσεις - ABC	•	•	•	•			•	•
Ευαισθησία στις αντιθέσεις - Landolt (8 θέσεις)					•	•		

Πολλές αποστάσεις είναι διαθέσιμες ανάλογα με τα επιλεγμένα μοντέλα. *Μη εξαντλητικά πακέτα και εξετάσεις.*

Για μία προσωποποιημένη λύση, επικοινωνήστε μαζί μας.

*Οι εξετάσεις ευαισθησίας, αντίστασης στη θάμβωση και του κεντρικού οπτικού πεδίου δεν είναι διαθέσιμες με το τηλεχειριστήριο.

ΤΑ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΜΟΝΤΕΛΑ: προτείνουμε εξίσου πακέτα εξετάσεων που προορίζονται για τον έλεγχο της όρασης των παιδιών καθώς και για τις άδειες οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

ΕΛΕΓΧΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ

Μετακινείστε; Δεν διαθέτετε υπολογιστή;

Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο **LCD μαζί με τη μεγάλη οθόνη αφής** του ώστε με ένα κλικ να ξεκινήσει μία εξέταση ή μία αλληλουχία εξετάσεων. Οι εξετάσεις του κεντρικού οπτικού πεδίου, της ευαισθησίας και της αντίστασης στη θάμβωση είναι διαθέσιμες μόνο με τις ηλεκτρονικές εκδόσεις.

Έλλειψη χρόνου;

Χρησιμοποιείτε το **VisioClick®** για να αυτοματοποιήσετε τις εξετάσεις σας, **οι ηχητικές οδηγίες** στη γλώσσα της επιλογής σας (γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, ολλανδικά, ιταλικά, πολωνικά, πορτογαλικά, τουρκικά, αραβικά...) κάνουν **την παρουσία του χειριστή προαιρετική**.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

(περιλαμβάνονται με τη συσκευή σας)

Μάσκες προσώπου μίας χρήσης
(προσφορά 1 κουτιού ανά συσκευή που αγοράζεται)

ΑΛΛΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

(δεν περιλαμβάνονται)

- Βαλίτσα μεταφοράς
- Προστατευτικό κάλυμμα



Ο ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΜΑΣ

2
ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ
VISIOLITE



51 rue Antoine Primat
69100 Villeurbanne

Tel +33 (0)4 72 34 89 89
Fax +33 (0)4 72 33 43 51
contact@fim-medical.com

