

VIZIOTEST



PĂTRUNDEȚI ÎNTR-O ALTĂ DIMENSIUNE **VISIOLITE® 4K**

DEPISTAREA TULBURĂRILOR DE VEDERE

- Simplu, rapid și complet
- Complet personalizabil și automatizabil
- Teste de calitate 4K
- Teste aleatorii de acuitate vizuală



O TEHNOLOGIE DE VÂRF PENTRU A VĂ SERVI MAI BINE

Visiolite® 4K este un aparat destinat serviciilor de sănătate în muncă și specialiștilor de medicină preventivă. Este un concentrat de tehnologii brevetate care combină optica, electronica și informatica, făcând posibilă **măsurarea acuității vizuale** și **detectarea principalelor tulburări de vedere**.



- 1 **Ecranul de tip 4K LCD de 5 inci** oferă o claritate și o calitate de neegalat a imaginii oferind în același timp o mare flexibilitate și personalizarea testelor (luminozitate, distanță, optotipuri...).
- 2 **Adaptat pentru purtătorii de lentile progresive**
Persoana testată trece de la vederea la distanță la vederea de aproape, pur și simplu prin coborârea privirii.
- 3 **Un detector hipersensibil & un suport frontal ergonomic** asigură poziționarea optimă a feței
- 4 **Analiza câmpului vizual complet**
Un sistem motorizat brevetat permite testarea
- 5 **Înterupător Pornit (On)/Oprit (Off)**
Aparatul poate fi scos de sub tensiune fără a fi nevoie să îl deconectați.
- 6 **Picior fixat într-un suport antiderapant** pentru a garanta stabilitatea aparatului



NUMEROASE POSSIBILITĂȚI cu VisioWin®

Software-ul **Visiolite® 4K** este intuitiv, vă permite manipularea rapidă și eficientă pentru a vă realiza examenele în câteva minute.

- Să creați secvențe de test în funcție de categoriile de muncă testate.
- Aplicați un sistem de scor pentru a facilita citirea rezultatelor.
- Să personalizați instrucțiunile date operatorului și pacientului.
- Trimiteți informații tehnice cu un singur clic către tehnicianul nostru atunci când aveți nevoie de asistență.
- Suport de ajutor la interpretarea rezultatelor și la crearea secvențelor

Nou


VisioWin® LES +

- Funcția de comparare a examinărilor.
- Facilitează configurarea stațiilor dumneavoastră IT de lucru importând și exportând parametrii dumneavoastră cu un singur clic.
- GATEWAY: simplificarea transmiterii rezultatelor cu ajutorul programelor software specifice domeniului profesional respectiv.
- Vizualizarea testelor văzute de pacient în timpul examinării.
- Teste aleatorii de acuitate vizuală pentru a evita memorarea.

PACHETE DE TESTE

COMPLET PERSONALIZABILE ȘI EVOLUTIVE

Universul **Visiolite® 4K** vă oferă o gamă largă de teste, astfel încât să nu scăpați nicio patologie importantă. Meseria dumneavoastră evoluează, la fel și noi.

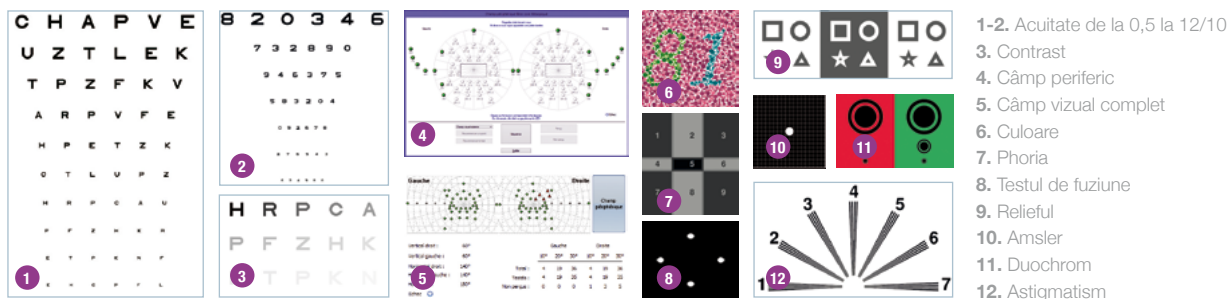

COMPARAȚI MODELELE ȘI ALEGEȚI-L PE CEL DORIT

PACHETE DE TESTE	Europe Edition	Europe Premium	US Edition	US Premium	DE Edition	DE Premium	UK Edition	UK Premium
Acuitate - ABC	•	•	•	•		•	•	•
Acuitate - 123	•	•		•	•	•		•
Acuitate - E de Raskin					•	•	•	•
Acuitate- Landolt (4 poziții)	•	•	•	•			•	•
Acuitate- Landolt (8 poziții)					•	•		
Amsler	•	•	•	•	•	•	•	•
Astigmatism	•	•	•	•	•	•	•	•
Vedere joasă - ABC (monocular)	•	•	•	•			•	•
Vedere joasă - Landolt (8 poziții) (monocular)					•	•		
Câmp vizual complet	•	•	•	•	•	•	•	•
Bicromatic roșu/verde	•	•			•	•	•	•
Fuziune	•	•	•	•	•	•	•	•
Hypermetropie ABC + 10	•	•	•	•			•	•
Hypermetropie E + 10					•	•		
Hypermetropie Landolt (4 poziții)+ 10							•	•
Mezopic	•	•	•	•	•	•	•	•
Mezopic Landolt (8 poziții)					•	•		
Forii	•	•	•	•	•	•	•	•
Percepția culorilor standard	•	•	•	•	•	•	•	•
Percepția reliefului	•	•	•	•	•	•	•	•
Rezistența la lumină orbitoare*		•		•		•		•
Sensibilitatea la lumină orbitoare*		•		•		•		•
Sensibilitatea la contraste - ABC	•	•	•	•			•	•
Sensibilitate la contraste - Landolt (8 poziții)					•	•		

Sunt disponibile mai multe distanțe în funcție de modelele alese. *Pachete și teste neexhaustive.*

Pentru o soluție personalizată, vă rugăm să ne contactați.

*Testele de sensibilitate, de rezistență la strălucire și de câmp vizual central nu sunt disponibile cu ajutorul telecomenzii.

CELELALTE MODELE ALE NOASTRE: Oferim și pachete de teste dedicate screening-ului vizual al copiilor precum și pentru permisele de conducere. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați.

CONTROLAȚI-VĂ APARATUL CU CEA MAI MARE UȘURINȚĂ

Vă deplasați?

Nu aveți la dispoziție un calculator?

Utilizați **telecomanda LCD** cu **ecranul tactil mare** al acesteia pentru lansa un test sau o secvență de teste cu un singur clic. Testele de câmp vizual central, de sensibilitate și de rezistență la lumină orbitoare sunt disponibile doar pe versiunile computerizate.

Nu aveți timp?

Utilizez **VisioClick®** pentru a vă automatiza testele, **instrucțiunile vocale** în limba aleasă de dumneavoastră (franceză, engleză, germană, spaniolă, olandeză, italiană, poloneză, portugheză, turcă, arabă...) făcând **prezența operatorului opțională**.

ACCESORII (incluse cu aparatul dumneavoastră)

Bonete pentru față de unică folosință
(1 cutie oferită pentru fiecare
aparat achiziționat)

ALTE ACCESORII (neincluse)

- Geantă de transport
- Husă de protecție



DISTRIBUITORUL DUMNEAVOASTRĂ

2
ANI
GARANȚIE
VISIOLITE



51 rue Antoine Primat
69100 Villeurbanne

Tel +33 (0)4 72 34 89 89
Fax +33 (0)4 72 33 43 51
contact@fim-medical.com

