

URZĄDZENIE DO BADAŃ PRZE-
SIEWOWYCH NARZĄDU WZROKU



WKRO CZ W INNY WYMIAR **VISIOLITE® 4K**

WYKRYWANIE SCHORZEŃ NARZĄDU WZROKU

- Łatwe, szybkie i dokładne badanie
- W pełni konfigurowalne i automatyczne
- Badania w jakości 4K
- Losowe badania ostrości wzroku



NAJNOWOCZEŚNIEJSZA TECHNOLOGIA BY LEPIEJ CI POMÓC

Visiolite® 4K to urządzenie przeznaczone dla specjalistów z zakresu higieny pracy oraz profilaktyki zdrowotnej. To kombinacja opatentowanych technologii łączących optykę, elektronikę i informatykę, umożliwiającą **pomiar ostrości wzroku i wykrywanie głównych problemów ze wzrokiem.**



- 1 5-calowy ekran LCD 4K** zapewnia niezrównaną ostrość i jakość obrazu, oferując jednocześnie dużą elastyczność i możliwość dostosowania badań (jasność, odległość, optotypy itd.).
- 2 Odpowiedni dla osób noszących szkła progresywne**
Podczas badania bada się widzenie z daleka, a następnie, po spojrzeniu w dół, widzenie z bliska.
- 3 Bardzo czuły detektor oraz ergonomiczne oparcie** dla czoła gwarantują optymalne ustawienie twarzy.
- 4 Analiza pełnego pola widzenia**
Opatentowany system mechaniczny umożliwia zbadanie pola poziomego, pionowego, nosowego i centralnego (64 diody LED poniżej 30°).
- 5 Przełącznik On/Off**
Urządzenie można wyłączyć bez konieczności odłączania go od zasilania.
- 6 Antypoślizgowa stopa** z obciążeniem zapewniająca stabilność.

LICZNE MOŻLIWOŚCI z VisioWin®

Oprogramowanie **VisioWin®**, jest intuicyjne, jego obsługa jest szybka i skuteczna, a realizacja badań zajmuje tylko kilka minut

- Może tworzyć sekwencje testowe dopasowane do kategorii podlegających badaniu
- Zastosuj punktację, aby ułatwić odczytywanie wyników
- Może personalizować instrukcje przeznaczone dla osoby przeprowadzającej badanie oraz pacjenta.
- Prześlij informacje techniczne do naszego technika jednym kliknięciem, gdy potrzebujesz pomocy.
- Wsparcie przy interpretacji wyników i tworzeniu sekwencji






VisioWin® ZALETY

- Funkcja porównywania badań.
- Ułatwia konfigurację stanowisk informatycznych poprzez importowanie i eksportowanie ustawień za pomocą jednego kliknięcia.
- GATEWAY: uproszczenie przesyłania wyników za pomocą pakietów oprogramowania branżowego.
- Wyświetlanie testów widzianych przez pacjenta podczas badania.
- Losowe testy ostrości wzroku, by uniknąć zapamiętywania.

PAKIETY TESTÓW

W PEŁNI PERSONALIZOWANE I SKALOWALNE

Świat **Visiolite® 4K** obejmuje szeroki zakres badań, które minimalizują ryzyko przeoczenia poważnego schorzenia. Twój zawód zmienia się, my także.

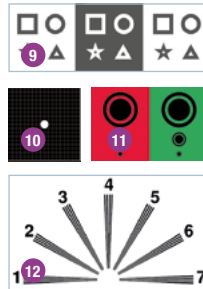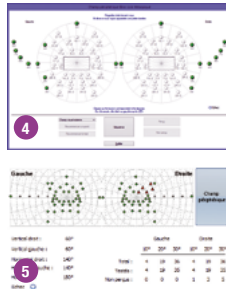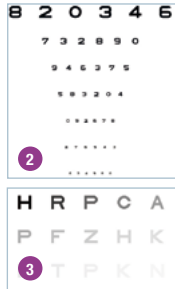

- 1-2. Ostrość od 0,5 do 12/10
3. Kontrast
4. Widzenie peryferyjne
5. Pełne pole widzenia
6. Postrzeganie kolorów
7. Ustawienie oczu
8. Fuzja
9. Widzenie stereoskopowe
10. Siatka Amslera
11. Duo-chrom
12. Astygmatyzm

PORÓWNAJ MODELE I WYBIERZ NAJLEPSZY DLA SIEBIE

PAKIETY TESTÓW	Europe Edition	Europe Premium	US Edition	US Premium	DE Edition	DE Premium	UK Edition	UK Premium
Ostrość - ABC	•	•	•	•		•	•	•
Ostrość - 123	•	•		•	•	•		•
Ostrość - E de Raskin					•	•	•	•
Ostrość - Landolt (4 pozycje)	•	•	•	•			•	•
Ostrość - Landolt (8 pozycje)					•	•		
Siatka Amslera	•	•	•	•	•	•	•	•
Astygmatyzm	•	•	•	•	•	•	•	•
Ślabowidzenie - ABC (jednooczne)	•	•	•	•			•	•
Ślabowidzenie - Landolt (8 pozycji) (jednooczne)					•	•		
Pełne pole widzenia	•	•	•	•	•	•	•	•
Duo-chrom czerwony/zielony	•	•			•	•	•	•
Fuzja	•	•	•	•	•	•	•	•
Nadwzroczność ABC + 10	•	•	•	•			•	•
Nadwzroczność E + 10					•	•		
Nadwzroczność Landolt (4 pozycje)+ 10							•	•
Widzenie mezopowe	•	•	•	•	•	•	•	•
Widzenie mezopowe Landolt (8 położeń)					•	•		
Ustawienie oczu	•	•	•	•	•	•	•	•
Standardowe postrzeganie kolorów	•	•	•	•	•	•	•	•
Widzenie stereoskopowe	•	•	•	•	•	•	•	•
Odporność na olśnienie*		•		•		•		•
Wrażliwość na olśnienie*		•		•		•		•
Wrażliwość na kontrast - abc	•	•	•	•			•	•
Wrażliwość na kontrasty - Landolt (8 pozycji)					•	•		

Dostępnych jest kilka odległości, w zależności od wybranych modeli. *Pakiety i testy nie są wyczerpujące.*

Aby uzyskać niestandardowe rozwiązanie, skontaktuj się z nami.

*Testy czułości, odporności na olśnienie i centralnego pola widzenia nie są dostępne z pilotem zdalnego sterowania.

NASZE INNE MODELE: Oferujemy również pakiety testów przeznaczone do badań wzroku dzieci a także do prawa jazdy. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt.

STERUJ URZĄDZENIEM W PROSTY SPOSÓB

Jesteś w podróży? Nie masz komputera?

Użyj **pilota LCD z dużym ekranem dotykowym**, aby jednym kliknięciem rozpocząć test lub sekwencję testów. Badania centralnego pola widzenia, wrażliwości oraz odporności na olśnienie są dostępne jedynie w wersjach skomputeryzowanych.

Nie masz czasu?

Użyj **VisioClick®** do automatyzacji testów, z **instrukcjami głosowymi** w wybranym języku (francuski, angielski, niemiecki, hiszpański, holenderski, włoski, polski, portugalski, turecki, arabski itp.), dzięki którym **obecność operatora nie jest wymagana**.



AKCESORIA (dołączone do urządzenia)

Jednorazowe ochroniacze na twarz
(1 pudełko dołączone do każdego zakupionego urządzenia)

INNE AKCESORIA (brak w zestawie)

- Walizka do transportu
- Futerał ochronny



DYSTRYBUTOR