

APARELHO DE
RASTREIO VISUAL



ENTRE
NUMA OUTRA
DIMENSÃO

VISIOLITE® 4K

**RASTREIO DOS
PROBLEMAS VISUAIS**

- Simples, rápido e completo
- Totalmente personalizável e automatizável
- Testes de qualidade 4K
- Testes de acuidade visual aleatórios



CE



UMA TECNOLOGIA DE PONTA PARA UM SERVIÇO CADA VEZ MELHOR

O **Visiolite® 4K** é um aparelho destinado aos serviços de medicina no trabalho e aos especialistas em medicina preventiva. É um concentrado de tecnologias patenteadas, que junta a óptica, a eletrônica e a informática, permitindo assim **medir a acuidade visual** e fazer o **despiste dos principais problemas da visão**.

- 1 **O ecrã 4K LCD, de 5 polegadas**, proporciona uma nitidez e uma qualidade de imagem inigualáveis, assegurando uma grande flexibilidade e a personalização dos testes (luminosidade, distância, optotipos...).
- 2 **Adaptado aos utilizadores de lentes progressivas**
A pessoa testada passa da visão ao longe para a visão ao perto simplesmente baixando o olhar.
- 3 **Um detetor sensível e um apoio frontal ergonómico** garantem um posicionamento ideal do rosto.
- 4 **Análise do campo visual completo**
Um sistema motorizado patenteado permite testar o campo horizontal, vertical, nasal e central (64 leds inferiores a 30°).
- 5 **Interruptor On/Off (Ligado/Desligado)**
O aparelho pode ser desligado, sem necessidade de retirar a ficha da tomada.
- 6 **Pé antiderrapante, pesado**, para garantir a estabilidade do aparelho.



NUMEROSAS POSSIBILIDADES com VisioWin®

O software **VisioWin®** é intuitivo, permitindo-lhe começar de forma rápida e eficaz e realizar os seus exames em apenas alguns minutos.

- Criar sequências de teste de acordo com as categorias de trabalho testadas.
- Atribuir uma pontuação para facilitar a leitura dos resultados.
- Personalizar as instruções dadas ao operador e ao paciente.
- Enviar as informações técnicas ao nosso técnico, com um simples clique, sempre que necessite de um serviço de assistência.
- Suporte de ajuda à interpretação dos resultados e à criação de sequências.



Novo


VisioWin® LES +

- Função de comparação de exames.
- Facilita a configuração dos seus postos de trabalho informáticos, porque importa e exporta os seus parâmetros com 1 simples clique.
- GATEWAY: simplificação da transmissão dos resultados com os pacotes de software de gestão.
- Visualização dos testes observados pelo paciente durante o exame.
- Testes de acuidade visual aleatórios, para evitar a memorização.

PACKS DE TESTES

TOTALMENTE PERSONALIZÁVEIS E EVOLUTIVOS

O universo **Visiolite® 4K** oferece-lhe uma vasta gama de testes, para não passar ao lado de uma patologia importante. A sua profissão evolui, nós também.

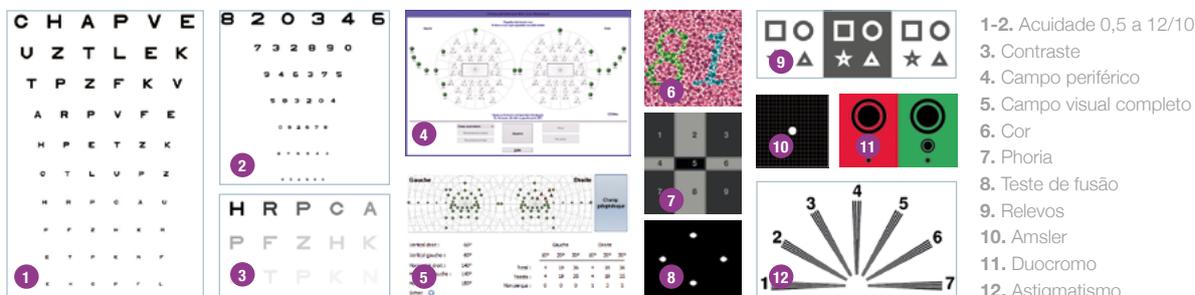

- 1-2. Acuidade 0,5 a 12/10
3. Contraste
4. Campo periférico
5. Campo visual completo
6. Cor
7. Phoria
8. Teste de fusão
9. Relevos
10. Amsler
11. Duocromo
12. Astigmatismo

COMPARE OS MODELOS E ESCOLHA O SEU

PACK DE TESTES	Europe Edition	Europe Premium	US Edition	US Premium	DE Edition	DE Premium	UK Edition	UK Premium
Acuidade - ABC	•	•	•	•		•	•	•
Acuidade - 123	•	•		•	•	•		•
Acuidade - E de Raskin					•	•	•	•
Acuidade - Landolt (4 posições)	•	•	•	•			•	•
Acuidade - Landolt (8 posições)					•	•		
Amsler	•	•	•	•	•	•	•	•
Astigmatismo	•	•	•	•	•	•	•	•
Baixa visão - ABC (monocular)	•	•	•	•			•	•
Baixa visão - Landolt (8 posições) (monocular)					•	•		
Campo visual completo	•	•	•	•	•	•	•	•
Vermelho/ verde duocromático	•	•			•	•	•	•
Teste de fusão	•	•	•	•	•	•	•	•
Hipermetropia ABC + 1 θ	•	•	•	•			•	•
Hipermetropia E + 1 θ					•	•		
Hipermetropia Landolt (4 posições)+ 1 θ							•	•
Visão mesópica	•	•	•	•	•	•	•	•
Visão mesópica Landolt (8 posições)					•	•		
Forias	•	•	•	•	•	•	•	•
Percepção das cores padrão	•	•	•	•	•	•	•	•
Relevos	•	•	•	•	•	•	•	•
Resistência ao encandeamento*		•		•		•		•
Sensibilidade ao encandeamento*		•		•		•		•
Sensibilidade aos contrastes - abc	•	•	•	•			•	•
Sensibilidade aos contrastes - Landolt (8 posições)					•	•		

Estão disponíveis diversas distâncias, em função dos modelos escolhidos. *Packs e testes não exaustivos.*

Para uma solução personalizada, entre em contacto connosco.

*Os testes de sensibilidade, de resistência ao encandeamento e de campo visual central, não estão disponíveis através do telecomando.

OS NOSSOS OUTROS MODELOS: Propomos igualmente packs de testes específicos para despistagem visual em crianças, assim como para as cartas de condução. Para mais informações, entre em contacto connosco.

MONITORIZE O SEU APARELHO COM TODA A SIMPLICIDADE

Precisa de se deslocar? Não tem computador?

Utilize o **telecomando LCD** com o seu **grande ecrã tátil** e bastará um único clique para lançar um teste ou uma sequência de testes. Os testes de campo visual central, de sensibilidade e de resistência ao encandeamento apenas se encontram disponíveis em versões informatizadas.

Tem falta de tempo?

Utilize **Visiolite® 4K** para automatizar os seus testes e as **instruções vocais** numa língua à sua escolha (Francês, Inglês, Alemão, Espanhol, Neerlandês, Italiano, Polaco, Português, Turco, Árabe...) fazem com que a **presença do operador seja opcional**.



ACESSÓRIOS (incluídos no seu aparelho)

Máscaras faciais descartáveis
(1 caixa oferecida por cada aparelho comprado)

OUTROS ACESSÓRIOS (não incluídos)

- Mala de transporte
- Bolsa de proteção



O SEU DISTRIBUIDOR

2
ANOS
GARANTIA
VISIOLITE



51 rue Antoine Primat
69100 Villeurbanne

Tel +33 (0)4 72 34 89 89
Fax +33 (0)4 72 33 43 51
contact@fim-medical.com

