

ANALIZADOR
DE LA FUNCIÓN VISUAL



ENTRE
EN OTRA
DIMENSIÓN

VISIOLITE® 4K

**DETECCIÓN DE
PROBLEMAS VISUALES**

- Fácil de usar, rápido y completo
- Completamente personalizable y automatizable
- Tests de calidad 4K
- Tests de agudeza visual aleatorios



CE



TECNOLOGÍA PUNTA PARA UN MEJOR SERVICIO

Visiolite® 4K es un dispositivo destinado a los servicios de salud laboral y a los especialistas en medicina preventiva.. Se trata de una mezcla de tecnologías patentadas que combinan óptica, electrónica e informática, para **medir la agudeza visual y detectar los principales trastornos de la vista.**




- 1 Pantalla 4K LCD 5** que ofrece una nitidez y una calidad de imagen inigualables, además de una gran flexibilidad y personalización de las pruebas (brillo, distancia, optotipos, etc.).
- 2 Adaptado a usuarios de lentes progresivas**
La persona examinada pasa de la visión de lejos a la visión de cerca simplemente bajando la mirada.
- 3 Detector sensible con apoyo frontal ergonómico** para garantizar una colocación óptima en la cara.
- 4 Análisis del campo visual completo**
Un sistema motorizado patentado permite probar el campo horizontal, vertical, nasal y central (64 LEDs de menos de 30°).
- 5 Interruptor On/Off**La unidad se puede apagar sin tener necesidad de desenchufar.
- 6 Pie lastrado antideslizante** para garantizar la estabilidad del dispositivo.

NUMEROSAS POSIBILIDADES con VisioWin®

El software de **VisioWin®** es intuitivo y le permitirá adaptarse a él de manera rápida y eficaz para realizar sus exámenes en unos minutos.

- Crear secuencias de prueba según las categorías de trabajo examinadas.
- Aplicar una puntuación para que resulte más fácil leer los resultados.
- Personalizar las instrucciones dadas al operario y al paciente.
- Enviar información técnica en 1 clic a nuestro técnico cuando necesite ayuda.
- Ayuda a interpretar resultados y crear secuencias.

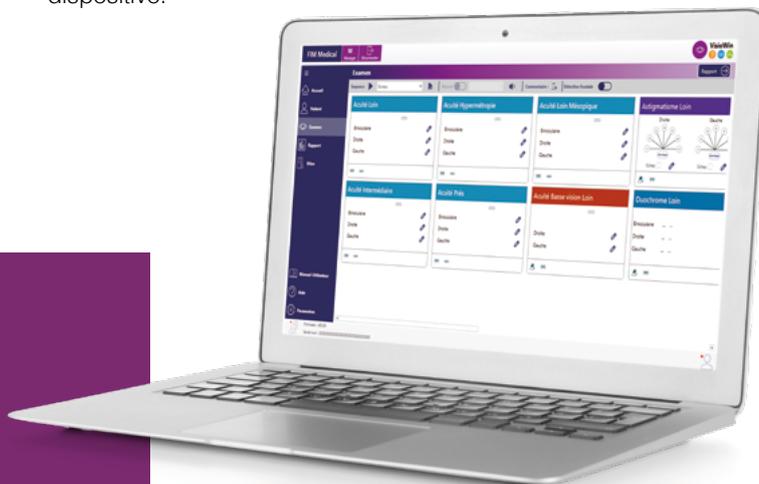

Nuevo


VisioWin® LES +

- Función comparación de pruebas.
- Facilita la configuración de las estaciones de trabajo importando y exportando su configuración en solo 1 clic.
- GATEWAY : simplificación de la transmisión de los resultados con paquetes de software para empresa.
- Visualización de las pruebas visionadas por el paciente durante el examen.
- Pruebas aleatorias de agudeza visual para evitar la memorización.

PAQUETES DE PRUEBAS

TOTALMENTE PERSONALIZABLE Y ESCALABLE

El universo **Visiolite® 4K** le ofrece una amplia gama de pruebas para no pasar por alto ninguna enfermedad importante. Su especialidad está cambiando y nosotros también.

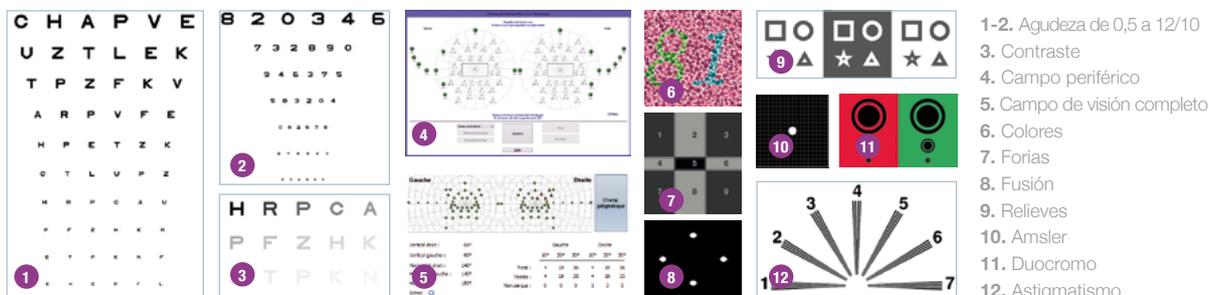

- 1-2. Agudeza de 0,5 a 12/10
3. Contraste
4. Campo periférico
5. Campo de visión completo
6. Colores
7. Forias
8. Fusión
9. Relieves
10. Amsler
11. Duocromo
12. Astigmatismo

COMPARE LOS MODELOS Y ELIJA EL SUYO

PAQUETES DE PRUEBAS	Europe Edition	Europe Premium	US Edition	US Premium	DE Edition	DE Premium	UK Edition	UK Premium
Agudeza - ABC	•	•	•	•		•	•	•
Agudeza - 123	•	•		•	•	•		•
Agudeza - E de Raskin					•	•	•	•
Agudeza - Landolt (4 posiciones)	•	•	•	•			•	•
Agudeza - Landolt (8 posiciones)					•	•		
Rejilla de Amsler	•	•	•	•	•	•	•	•
Astigmatismo	•	•	•	•	•	•	•	•
Baja Visión - ABC (Monocular)	•	•	•	•			•	•
Baja Visión - Landolt (8 posiciones) (monocular)					•	•		
Campo de visión completo	•	•	•	•	•	•	•	•
Duocromo rojo/verde	•	•			•	•	•	•
Fusión	•	•	•	•	•	•	•	•
Hipermetropía ABC + 1∅	•	•	•	•			•	•
Hipermetropía E + 1∅					•	•		
Hipermetropía de Landolt (4 posiciones) + 1∅							•	•
Mesópico	•	•	•	•	•	•	•	•
Mesópico Landolt (8 posiciones)					•	•		
Foria	•	•	•	•	•	•	•	•
Percepción estándar del color	•	•	•	•	•	•	•	•
Relieves	•	•	•	•	•	•	•	•
Resistencia al deslumbramiento*		•		•		•		•
Sensibilidad al deslumbramiento*		•		•		•		•
Sensibilidad a los contrastes - ABC	•	•	•	•			•	•
Sensibilidad al contraste - Landolt (8 posiciones)					•	•		

Hay disponibles varias distancias en función de los modelos elegidos. *Paquetes y pruebas no exhaustivos.*

Contacte para una solución personalizada.

* Las pruebas de sensibilidad, resistencia al deslumbramiento y el campo de visión central no están disponibles con mando a distancia.

NUESTROS OTROS MODELOS: Le proponemos también paquetes de pruebas específicos con pruebas visuales para niños, así como para permisos de conducir. Para más información, póngase en contacto con nosotros.

MANEJE SU DISPOSITIVO CON TOTAL SENCILLEZ

¿Debe desplazarse?
¿No dispone de ordenador?

Utilice **el mando LCD** con su **gran pantalla táctil** para iniciar una prueba o secuencia de pruebas con un solo clic. Las pruebas de campo visual central, sensibilidad y resistencia al deslumbramiento solo están disponibles en las versiones informatizadas.

¿Falta de tiempo?

Utilice **VisioClick®** para automatizar sus tests, las instrucciones por voz en el idioma deseado (francés, inglés, alemán, español, neerlandés, italiano, polaco, portugués, turco, árabe...) hacen que la presencia del operario resulte opcional.



ACCESORIOS (incluidos con el aparato)

Mascarillas faciales desechables
(se incluye una caja por aparato)

OTROS ACCESORIOS (no incluidos)

- Maleta de transporte
- Funda de protección



SU DISTRIBUIDOR

2
AÑOS
GARANTÍA
VISIOLITE



51 rue Antoine Primat
69100 Villeurbanne

Tél +33 (0)4 72 34 89 89
Fax +33 (0)4 72 33 43 51
contact@fim-medical.com

