

SEHTESTGERÄT



# BETRETEN SIE EINE ANDERE DIMENSION **VISIOLITE® 4K**

## DIAGNOSE VON SEHSTÖRUNGEN

- Einfach, schnell und alles in einem Gerät
- Vollständig personalisierbar und automatisierbar
- Tests in 4K-Qualität
- Zufällige Sehschärfetests



## EINE SPITZENTECHNOLOGIE UM IHNEN BESSER ZU DIENEN

Das **Visiolite® 4K** ist ein Sehtestgerät für alle betriebsmedizinischen Vorsorge-Untersuchungen. Es ist ein Konzentrat patentierter Technologien, das Optik, Elektronik und Informatik kombiniert, um die **Sehschärfe** zu messen und **die wichtigsten Sehstörungen zu erkennen**.



- 1 Das **5-Zoll 4K-LCD-Display** bietet unübertroffene Schärfe und Bildqualität bei gleichzeitig hoher Flexibilität und Personalisierung der Tests (Helligkeit, Entfernung, Optotypen...).
- 2 **Geeignet für Gleitsichtbrillen-Träger**  
Bei der zu untersuchenden Person kann die Fernsicht und auch die Nahsicht ganz einfach durch Senken des Blickes getestet werden.
- 3 **Ein sensibler Detektor mit ergonomischer Stirnauflage** garantiert für eine optimale Platzierung des Gesichts.
- 4 **Vollständige Gesichtsfeldanalyse**  
Ein patentiertes Motorsystem ermöglicht das Testen des waagerechten, senkrechten, nasalen und zentralen Gesichtsfeldes (64 Leds unter 30°).
- 5 **An-/Ausschalter** Das Gerät kann spannungsfrei abgeschaltet werden, ohne dass der Netzstecker gezogen werden muss.
- 6 **Rutschfester beschwerter Ständer**, um die Stabilität des Geräts zu gewährleisten.



## ZAHLREICHE MÖGLICHKEITEN mit VisioWin®

Die **VisioWin®** Software ist intuitiv und ermöglicht Ihnen eine schnelle und effiziente Handhabung für die Durchführung Ihrer Untersuchungen innerhalb weniger Minuten. Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Erstellung von Testsequenzen entsprechend der getesteten Arbeitskategorien.
- Anwendung eines Scoring-Verfahrens, um die Auswertung der Ergebnisse zu erleichtern.
- Personalisierung der Dateneingabe für den Bediener und den Patienten.
- Übermittlung technischer Daten in einem Klick an unseren Techniker, wenn Sie Hilfe benötigen.
- Support und Hilfe bei der Auswertung der Ergebnisse und der Erstellung der Sequenzen.

**Neu**


## VisioWin® DIE PLUSPUNKTE

- Funktion zum Vergleich von Sehtests.
- Erleichtert die Konfiguration Ihrer Computerarbeitsplätze durch Import und Export Ihrer Parameter mit nur einem Klick.
- GATEWAY: Vereinfachung der Ergebnisübermittlung mit berufsbezogenen Unternehmenssoftwarepaketen.
- Visualisierung der von dem Patienten gesehenen Tests.
- Zufällige Sehschärfetests zur Vermeidung von Auswendiglernen.

# TESTPAKETE

## VOLLSTÄNDIG ANPASSBAR UND ERWEITERBAR

Das **Visiolite® 4K** Gerät bietet Ihnen eine große Auswahl an Tests, so dass keine schwerwiegenden Pathologien unerkannt bleiben. Ihr Beruf entwickelt sich weiter, wir uns auch.

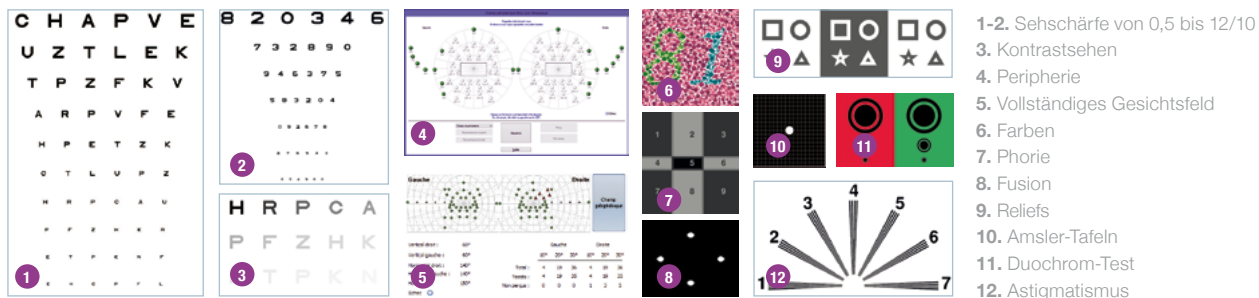

## VERGLEICHEN SIE DIE MODELLE

### UND WÄHLEN SIE AUS

| TESTPAKETE                                      | DE Edition | DE Premium |
|-------------------------------------------------|------------|------------|
| Sehschärfe – ABC                                |            | •          |
| Sehschärfe – 123                                | •          | •          |
| Sehschärfe – Raskin-E                           | •          | •          |
| Sehschärfe - Landolt (8 Positionen)             | •          | •          |
| Amsler-Tafeln.                                  | •          | •          |
| Astigmatismus                                   | •          | •          |
| Low Vision - Landolt (8 Positionen) (monokular) | •          | •          |
| Vollständiges Gesichtsfeld                      | •          | •          |
| Duochrom-Test (Rot/Grün)                        | •          | •          |
| Fusion                                          | •          | •          |
| Hypermetropie E + 1 $\Delta$                    | •          | •          |
| Mesopisch                                       | •          | •          |
| Mesopisch Landolt (8 Positionen)                | •          | •          |
| Phorie                                          | •          | •          |
| Wahrnehmung von Standardfarben                  | •          | •          |
| Reliefs                                         | •          | •          |
| Blendungserholung*                              |            | •          |
| Blendungsempfindlichkeit*                       |            | •          |
| Kontrastsehen - Landolt (8 Positionen)          | •          | •          |

Je nach gewähltem Modell stehen mehrere Abstände zur Verfügung. *Nicht erschöpfende Pakete und Tests.*

Für eine individuelle Lösung kontaktieren Sie uns bitte.

\* Empfindlichkeits-, Blendschutz- und zentrale Gesichtsfeldtests sind mit der Fernbedienung nicht verfügbar.

**UNSERE ANDEREN MODELLE:** Wir bieten auch Testpakete für Sehtests für Kinder an sowie für Führerscheine. Wenden Sie sich für Informationen an uns.

# STEUERN SIE IHR GERÄT AUF GANZ EINFACHE WEISE

## Sie bewegen sich? Sie haben keinen Computer?

Verwenden Sie die **LCD-Fernbedienung** mit ihrem **großen Touchscreen**, um mit einem einzigen Klick einen Test oder eine Testsequenz zu starten. Die Tests des zentralen Gesichtsfelds, der Blendungsempfindlichkeit und der Blendungserholung sind nur bei den computerisierten Versionen verfügbar.

## Zeitmangel?

Verwenden Sie **VisioClick®**, um Ihre Tests zu automatisieren, **die Sprachanweisungen** in der Sprache Ihrer Wahl (Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Türkisch, Arabisch...) machen **die Anwesenheit des Bedieners optional**.



## ZUBEHÖR (mitgeliefert)

Einweg-Schutzhäubchen  
(pro gekauftem Gerät 1 Schachtel gratis)

## WEITERES ZUBEHÖR (nicht mitgeliefert)

- Transportkoffer
- Schutzhaube



IHR HÄNDLER