

DÉPISTEUR VISUEL



ENTREZ DANS UNE AUTRE DIMENSION **VISIOLITE® 4K**

DÉPISTAGE DES TROUBLES VISUELS

- Simple, rapide et complet
- Entièrement personnalisable et automatisable
- Tests en qualité 4K
- Tests d'acuité aléatoires



UNE TECHNOLOGIE DE POINTE POUR MIEUX VOUS SERVIR

Le **Visiolite® 4K** est un appareil destiné aux services de santé au travail et aux professionnels de la médecine préventive. C'est un concentré de technologies brevetées alliant optique, électronique et informatique, permettant de **mesurer l'acuité visuelle** et de **dépister les principaux troubles de la vue**.



- 1 **Écran 4K LCD 5 pouces** offre une netteté et une qualité d'image inégalées tout en proposant une grande flexibilité et personnalisation des tests (luminosité, distance, optotypes...).
- 2 **Adapté aux porteurs de verres progressifs**
Le patient passe de la vision de loin à la vision de près simplement en abaissant son regard.
- 3 **Détecteur sensitif & Appui frontal amovible** assurent un placement optimal du visage
- 4 **Analyse du champ visuel complet**
Un système motorisé breveté permet de tester le champ horizontal, vertical, nasal et central (64 leds inférieures à 30°)
- 5 **Interrupteur On/Off**
L'appareil peut être mis hors tension sans avoir à le débrancher.
- 6 **Pied lesté antidérapant** pour garantir la stabilité de l'appareil



DE NOUVELLES POSSIBILITÉS avec VisioWin®

VisioWin®, logiciel intuitif, permet une prise en main rapide et efficace pour réaliser vos examens en quelques minutes.

- Créer des séquences de test personnalisées par catégorie de métiers
- Appliquer un scoring pour faciliter la lecture des résultats.
- Personnaliser les instructions données à l'opérateur et au patient.
- Envoyer les informations techniques en 1 clic à notre technicien lorsque vous avez besoin d'assistance.
- Support d'aide à l'interprétation des résultats et à la création de séquences.

Nouveau


VisioWin® LES +

- Fonction comparaison d'examens
- Facilite la configuration de vos postes informatiques en important et exportant vos paramètres en 1 seul clic.
- GATEWAY : simplification de la transmission des résultats avec les progiciels métiers.
- Visualisation des tests vus par le patient pendant l'examen.
- Tests d'acuité aléatoires pour éviter la mémorisation.

DES PACKS DE TESTS

ENTIÈREMENT PERSONNALISABLES ET ÉVOLUTIFS

L'univers **Visiolite® 4K** vous offre un large choix de tests afin de ne pas passer à côté d'une pathologie importante. Votre métier évolue, nous aussi.

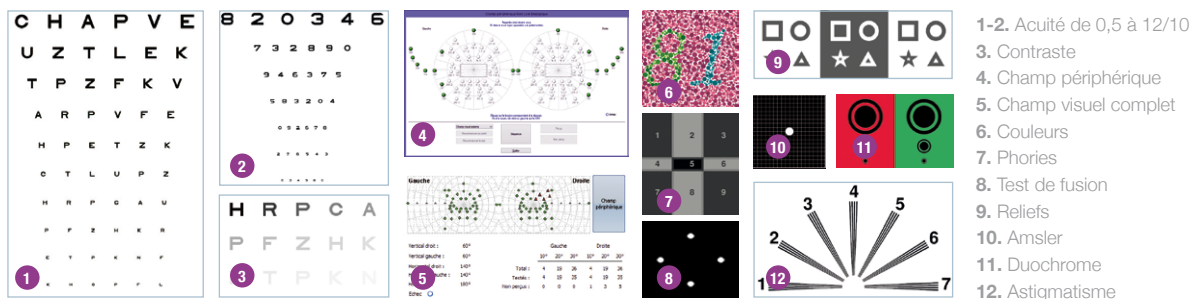

COMPAREZ LES MODÈLES ET CHOISISSEZ LE VÔTRE

PACKS DE TESTS	Europe Edition	Europe Premium	US Edition	US Premium	DE Edition	DE Premium	UK Edition	UK Premium
Acuité – ABC	•	•	•	•		•	•	•
Acuité – 123	•	•		•	•	•		•
Acuité – E de Raskin					•	•	•	•
Acuité – Landolt (4 positions)	•	•	•	•			•	•
Acuité – Landolt (8 positions)					•	•		
Amsler	•	•	•	•	•	•	•	•
Astigmatisme	•	•	•	•	•	•	•	•
Basse vision – ABC (monoculaire)	•	•	•	•			•	•
Basse vision – Landolt (8 positions) (monoculaire)					•	•		
Champ visuel complet	•	•	•	•	•	•	•	•
Duochrome rouge/vert	•	•			•	•	•	•
Fusion	•	•	•	•	•	•	•	•
Hypermétropie ABC + 1Δ	•	•	•	•			•	•
Hypermétropie E + 1Δ					•	•		
Hypermétropie Landolt (4 positions)+ 1Δ							•	•
Mésopique	•	•	•	•	•	•	•	•
Mésopique Landolt (8 positions)					•	•		
Phories	•	•	•	•	•	•	•	•
Perception des couleurs standard	•	•	•	•	•	•	•	•
Reliefs	•	•	•	•	•	•	•	•
Résistance à l'éblouissement		•		•		•		•
Sensibilité à l'éblouissement		•		•		•		•
Sensibilité aux contrastes - ABC	•	•	•	•			•	•
Sensibilité aux contrastes – Landolt (8 positions)					•	•		

Plusieurs distances sont disponibles en fonction des modèles choisis. *Packs et tests non exhaustifs.*
Pour une solution personnalisée, veuillez nous contacter.

NOS AUTRES MODÈLES : Nous proposons également des packs de tests dédié au dépistage visuel des enfants ainsi que pour les permis de conduire. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.

PILOTEZ VOTRE APPAREIL EN TOUTE SIMPLICITÉ

Vous vous déplacez ? Vous ne disposez pas d'ordinateur ?

Utilisez la **télécommande LCD** avec son **large écran tactile** pour en un seul click lancer un test ou une séquence de tests. Les tests de champ visuel central, sensibilité et résistance à l'éblouissement sont disponibles uniquement sur des versions informatisées.

Manque de temps ?

Utilisez **VisioClick®** pour automatiser vos tests, les **instructions vocales** dans la langue de votre choix (Français, anglais, allemand, espagnol, néerlandais, italien, polonais, portugais, turque, arabe...) rendent la **présence de l'opérateur optionnelle**.



ACCESSOIRES (inclus avec votre appareil)

Bonnettes faciales à usage unique
(1 boîte offerte par appareil acheté)

AUTRES ACCESSOIRES (non inclus)

- Valise de transport
- Housse de protection



VOTRE DISTRIBUTEUR

2
ANS
GARANTIE
VISIOLITE



51 rue Antoine Primat
69100 Villeurbanne

Tél +33 (0)4 72 34 89 89
Fax +33 (0)4 72 33 43 51
contact@fim-medical.com

